

Inskam H100, препарат за премахване на черните очи



Ръководство за употреба

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба.

Запазете ръководството за бъдещи справки.

Показанието изобразенията и илюстрациите може да варират в зависимост от модела на устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Преди употреба не забравяйте да приложите горещ компрес върху лицето си с помощта на парата на лицето или горещата кърпа, за да отворите порите и да омекотите черния очак и маслото, след което черният очак може лесно да бъде измъкнат.
2. Потребителите с чувствителна кожа, моля, изберете по-ниско ниво за първи път и след това постепенно увеличете нивото според състоянието на кожата.
3. Не натискайте приставката на продукта върху кожата на лицето, за да избегнете нараняване на кожата.
4. Него оставайте на място от върху дълго, за предпочитане не повече от 2 секунди, в противен случай може да причините обесцветяване или увреждане на кожата.
5. Препоръчително е да се използва 1-2 пъти седмично, не повече от 5 минути всеки път, не е подходящ за многократно и дългосрочно използване.
6. След използване на продукта може да се появи лек одразненост или зачервяване на кожата, това е нормално и ще отшуми до 30 минути. Изключете само себе си, моля, покрийте се за кожата си.
7. Не се препоръчва употребата на бременни жени, деца, пациенти с кожни заболявания или лица след пластични операции на лицето.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТА

- Уредът за премахване на черния очак и нов тип уред за почистване, грижа и красота на лицето, който съчетава функцията за почистване на порите, премахване на мазнина, премахване на черния очак и др.

- В комбинация с неинвазивна технология и функция за вакуумна абсорбция на продукта, този продукт използващащ кожата на крайник с различни спецификации. Абсорбира замърсяванията и черния очак и в порите, така че подобрява епидермиса на кожата и порите от ново състояние - гладки и затворени.

- Този продукт може да бъде свързан към мобилен телефон и компютър и състоянието на кожата на лицето може да бъде ясно и интуитивно разбрано чрез APP за мобилен телефон или компютърно софтуер.

ПРОДУКТОВА СХЕМА

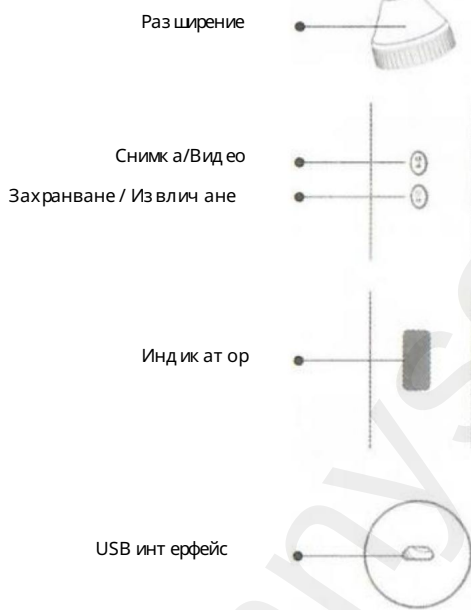


ИНСТРУКЦИИ

Мобилни потребители Сканирайте

QR кода и изтеглете приложението.



2. Отстранете продукта, изберете подходящ априлат и я монтирайте в горната част на продукта.

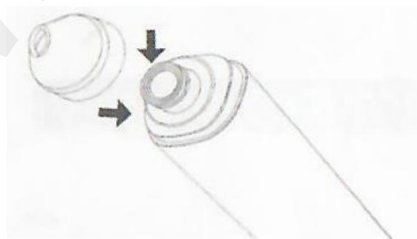

Подходящ за различни типове кожа



Малка кръгла приставка
за чувствителни зони



Малка овална приставка
За отстраняване
черниточки в браздигенос



Голяма овална приставка
Голяма приставка за
засмукване, подходяща
за черниточки в Т-зоната



Микро кристален
разширение

Подходящ за нежно
ексфолиране и

отстраняване на мъртва кожа



Средно кръгла
разширение

Подходящ за райони с
повисока забележителност
черни


точките/акне/омазняване



Голяма кръгла приставка


Подходящ за черни
точките в Т-зоната

3. Натиснете продължително бутон за захранване за 2 секунди, за да стартирате продукта, светодиодът на продукта ще светне, отворете приложението „Cleanki“ и щракнете, за да свържете WiFi „Cleanki-XXXX“ .

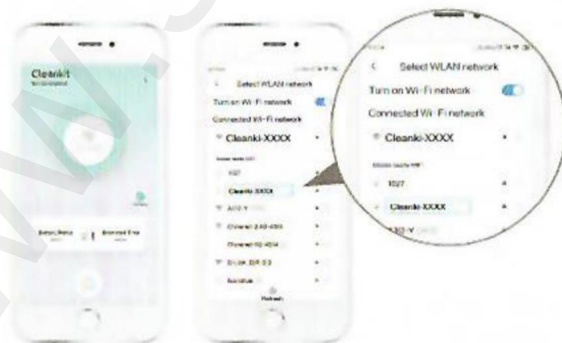

4. След като се свържете с Wi-Fi, върнете се към приложението „Cleanki“, насочете обектив към лицето си и потвърдете, че можете да видите състоянието на порите на лицето си на телефона си. Когато се появи следната подкана: „Cleanki-xxxx не е достъпен онлайн, което позволява на WLAN асистент да превключи към подобра мрежа?“, щракнете върху „не е разрешено“.

5. Възвключено състояние можете да натиснете за кратко за захранване/изпускане, за да регулирате засмукването на продукта според вашите нужди. Продуктът е настроен на 3 непрекъснати и скороства (нежен режим, стандартен режим, силен режим).

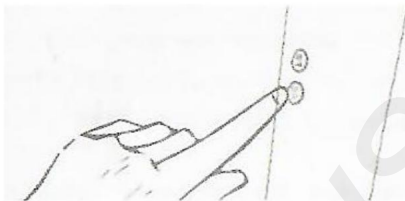

6. Бавно преместете върха върху кожата и не го дръжте върху една област за повече от 2 секунди.



7. Почистете продукта след употреба и го дръжете сухо и чист за по-нататъшна употреба.

ЗАРЕЖДАНЕ

Когато мощността е ниска, червената светлина мига; За зареждане трябва да използвате захранващ адаптер с посоченото напрежение от 5V/1A.

Когато батерията се зарежда, светлинният индикатор свети в червено.

Когато зареждането приключи, светлинният индикатор ще светне в зелено (зареждане за 2 часа).

ПАРАМЕТРИ

Име	Интелигентно визуално средство за премахване на черниточки
Уголемяване	20x
Параметри на батерията	800 mAh
Време за зареждане	2 часа
Живот на батерията	1,5 часа
Размери	197 × 40 × 40 mm
Системна поддръжка	Android 4.4, iOS 9.0, Windows Vista/7/8/10, MacOS X 10.8 и по-нова версия
Списък с елементи	Интелигентно визуално средство за премахване на черниточки 1x Разширение 6x USB кабел за данни 1 x Продуктово ръководство 1x

Дистрибутор
Sunnysoft sro
Кованечка 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz