

MASÁŽNÍ PISTOLE YJ04



Uživatelský manuál

Přehled

Masážní
hlava (vyměnitelná)



Rukojeť

Masážní hlavy



Kuželový tvar

Ovlivnění
hlubokých
akupunkturálních
bodů (meridiány
a klouby).



Kulatý tvar

Pro většinu svalů,
například pro dlaň
nebo chodidlo.



Tvar U

Masáž krku a
achilovky.



Plochý tvar

Hlubková
stimulace
velkých svalů,
nohou a hýždě.



Tvar půlměsíce

Břicho, krk,
nohy,
k odstranění
tuku a masáž.



Tvar prstu

Hluboké
akupunkturální
body, masáž
hlavy.



Tvar škrabky

Břicho, pás,
ramena, další
svaly,
akupunkturální
stimulace.



Tvar hříbu

Hluboké svaly,
meridiány,
klouby, dlaň,
chodidlo, celé
tělo.

Použití

Zapnout/Vypnout

Po dobu 3 s, stiskněte a přidržte tlačítko zapnout/vypnout a zařízení zapněte.


Po dobu 3 s, stiskněte a přidržte tlačítko zapnout/vypnout a zařízení vypněte.

Nastavení síly masáže

Na displeji jsou zobrazeny otáčky.


Stiskněte tlačítko + nebo – a nastavte požadovanou sílu.

Maximum je 32.

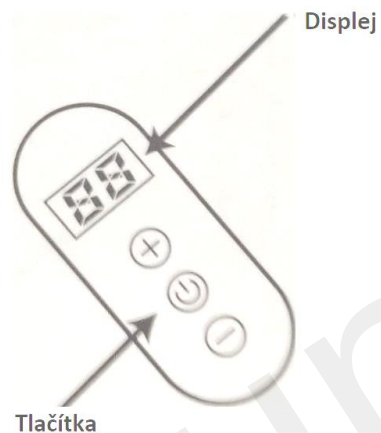


Poznámka: nevystavujte svaly, klouby a kosti dlouhodobému masážnímu tlaku. Jinak hrozí riziko poranění. Po 15 min činnosti se zařízení automaticky vypne.

Výměna hlavice

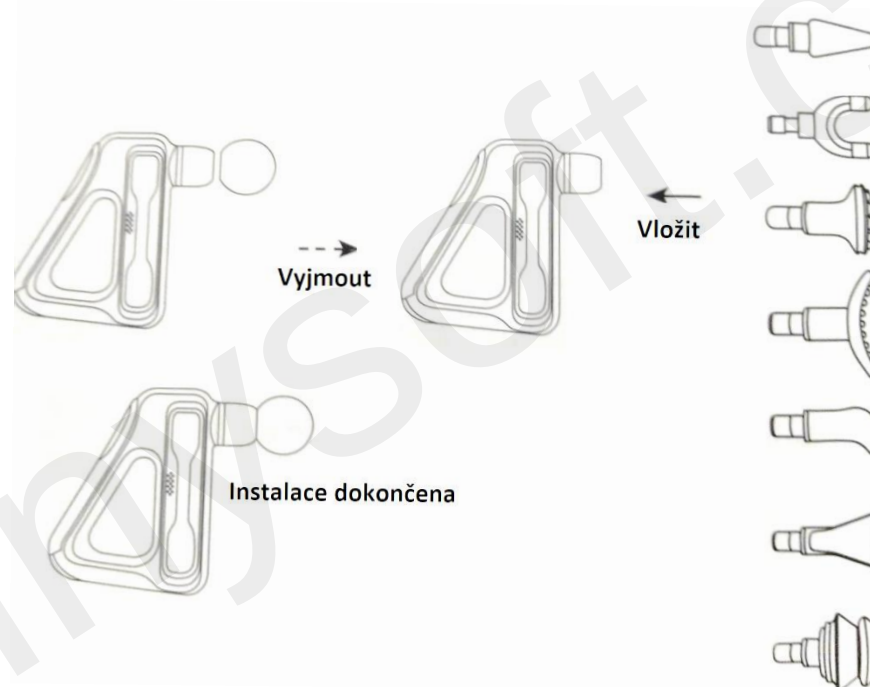

Nabíjení

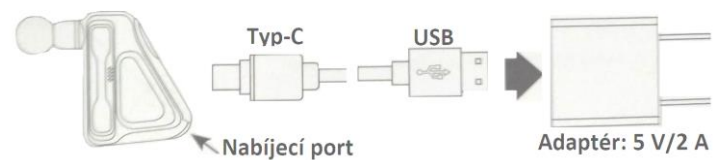

Poznámka: adaptér není součástí balení. Použijte adaptér s danými parametry (např. na mobilní telefon).

1. Zapněte zařízení.
2. Nasadte požadovanou hlavici. Za původní hlavici zatáhněte a poté ji nahraďte novou.
3. Zapojte nabíjecí adaptér (5 V).
4. Před prvním použitím, zařízení nabijte. Zařízení nabíjejte alespoň 3 h. Během nabíjení, na displeji bude zobrazen blikající symbol „—“. Po plném nabití, symbol přestane blikat.

Indikace

Bolest a křeče způsobené pohmožděním, podvrtnutím a namožením svalů.

Napomáhá odtoku edémové tekutiny v oblasti otoku.

Volná a pojivová tkáň a fascie.

Snižují hromadění kyseliny mléčné ve svalu.

Zvyšují rozsah pohybu kloubů.

Odstraňuje svalovou únavu.

Upozornění

Zařízení nesmějí používat osoby s aneurysmem, krvácením, atd. Lidé se srdečním onemocněním a defibrilátorem. Těhotné ženy a lidé s rakovinou. Nepoužívejte zařízení v místech vnější nebo vnitřní fixace (alespoň 3 palce od daného místa). Nepoužívejte zařízení v oblasti hlavy, obličeje, obratlů a páteře. V oblastech, kde je tenká kůže, kosti, v oblasti chodidel a rukou.

Specifikace

Název: Masážní pistole

Jmenovité napětí: 7,4 V

Výkon motoru: 30 W

Nabíjecí rozhraní: Typ-C

Rychlost: 1800-3200

Otáčky: 32 úrovní

Počet masážních hlav: 8

Materiál: elektronické komponenty a ABS plast

Hmotnost: 0,64 kg

Rozměr: 170 x 51 x 202 mm

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz