


MASÁŽNÍ PISTOLE M2




Uživatelský manuál

Popis

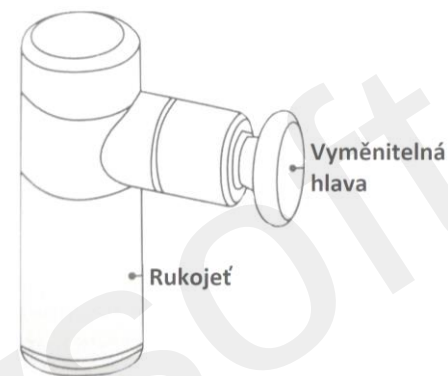

Masážní hlavy

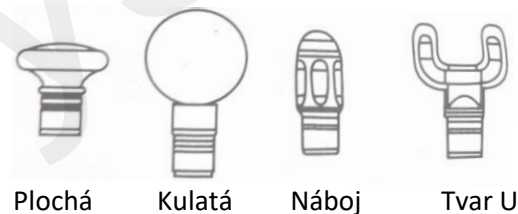

Plochá: pro všechny svaly, uvolnění svalů
Kulatá: pro masáže: např. chodidlo, dlaň
Náboj: hlubší masáž svalů: klouby, boční části těla
Tvar U: krk, páteř, atd.

Použití

Zapnout/vypnout


Stiskněte a přidržte tlačítko na spodní straně rukojeti po dobu 2,5 s a zařízení zapněte.

Stiskněte a přidržte tlačítko na spodní straně rukojeti po dobu 2,5 s a zařízení vypněte.

Nastavení síly masáže

4 rychlosti. 1. rychlost je nastavena jako výchozí nastavení. Stiskněte tlačítko po dobu 2,5 s a zařízení zapnete, poté opět postupně stiskněte tlačítko a vyberte požadovanou rychlost.

Výměna masážní hlavy

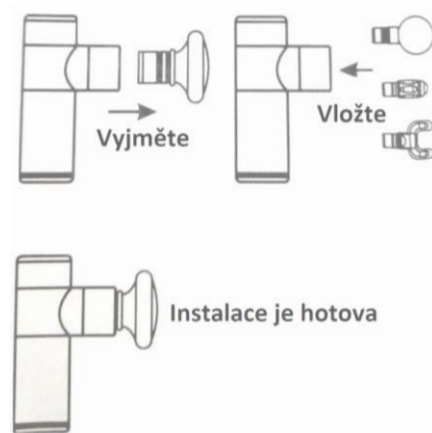

Specifikace

Název: ZC-002 masážní pistole

Baterie: 2000 mAh, lithiová baterie

Doba trvání: 6-8 h

Rychlost: 1-4

Typ nabíjení: Typ-C

Rozměr: 14*9.5 cm; Hmotnost: 500 g

Otáčení: 1500-2800 rpm

Počet masážních hlavic: 4

Doba nabíjení: 2 h

Materiál: hliníková slitina

Amplituda: 6 mm

LED indikátor

Modrá LED

LED indikátor je umístěn na spodní části rukojeti.

LED indikuje rychlost masážní hlavy. 1 LED – 1. rychlost, 2 LED – 2. rychlost, 3 LED – 3. rychlost, 4 LED – 4. rychlost

Zelené/červené LED


Zelené světlo svítí během provozu zařízení.

Pokud je zařízení nabito, zelené světlo 3x zabliká během 5 s. Pokud je baterie méně než z 60 %, zelené světlo zabliká 2x během 5 s. Pokud je stav baterie menší než 30 %, zelená LED zabliká 1x za 5 s.

Během nabíjení: červená LED svítí.

Zařízení je plně nabito: zelená LED svítí

Nabíjení

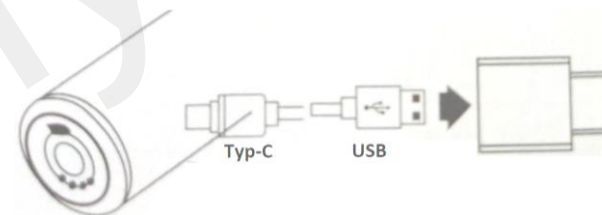

Poznámka: adaptér není součástí balení.

Před prvním použitím zařízení plně nabijte. Pokud bude stav baterie menší než 10 %, LED bude červeně blikat. Pokud bude LED červeně svítit, zařízení nabijte.

Upozornění

Během nabíjení, zařízení nepoužívejte. Ve chvíli, kdy bude blikat červená LED, zařízení co nejdříve nabijte.

Indikace

Bolesti a křeče způsobené pohmožděním, podvrtnutím a namožením svalů. Pomáhá proti otokům. Uvolnění a zesílení pojivové tkáně a vaziva. Snížení hromadění kyseliny mléčné ve svalu. Zvýšení pohyblivost kloubů. Odstranění svalové únavy.

Varování

Lidé s aneurysmem, krvácením, léky na ředění krve nesmějí zařízení používat. Dále lidé se srdeční onemocnění nebo s kardiostimulátorem, těhotné ženy nebo lidé s rakovinou. Zařízení nepoužívejte v místě, kde se nachází vnitřní/vnější fixace (cca do 3 palců vzdálenosti). Citlivá oblast: hlava, obličej, krční obratle a páteř, poloha holenní kosti, hřbetu nohy, hřbetu ruky.

Obsah balení

1x masážní pistole 1x, 1x nabíjecí kabel, 1x uživatelský manuál, 1x kulatá hlava, 1x plochá hlava, 1x hlava ve tvaru náboje a 1x hlava ve tvaru U.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz