

MASÁŽNÍ PISTOLE S3



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Popis



1. Výkonné masážní zařízení s vysokým točivým momentem.
2. Nabíjecí lithiová baterie (2+ hodiny používání na jednu výměnu)
3. Nastavení rychlosti pro optimální tlak
4. Bezdrátové zařízení s nízkou hmotností (součástí balení je i nabíjecí adaptér)
5. Tlačítko zapnout/vypnout
6. 6x masážní hlavice

Masážní hlavice



Specifikace

Hmotnost: 1,1 kg

Nabíjení: 110-240 V 50/60 Hz – 5 A -26 VDC-1 A

Nabíjení

Před prvním použitím, zařízení nabijte. Doba nabíjení je cca 6 h. K nabíjení použijte přiložený DC adaptér 24 V. Vložte nabíjecí kabel do portu, nabíjecí adaptér vložte do zdroje napětí.

Během nabíjení LED indikátor baterie pulzuje a ukazuje stav baterie.

Ve chvíli, kdy LED přestane pulzovat, zařízení je plně nabito.

Není doporučeno zařízení úplně vybit (červená LED).

Na jedno nabití, zařízení funguje po dobu 2+ h v závislosti na zvolené rychlosti otáčení a tlaku.

Ovládání

Zařízení zapnete pomocí tlačítka zapnout/vypnout na spodní straně zařízení. Zařízení vypnete opět pomocí tlačítka zapnout/vypnout na spodní části zařízení.


Vložte do přední části požadovanou masážní hlavici. Hlavici zatlačte do otvoru. Po použití hlavici zase vyjměte za použití síly.

Po zapnutí zařízení (tlačítko na spodní části zařízení) a zapojení hlavice.

Stiskněte poté tlačítko zapnout/vypnout na displeji zařízení. Poté

stiskněte tlačítko + nebo tlačítko – a nastavte požadovanou rychlost.

Hodnota rychlosti bude zobrazena na levé straně displeje. Na pravé straně displeje bude zobrazen stav baterie.

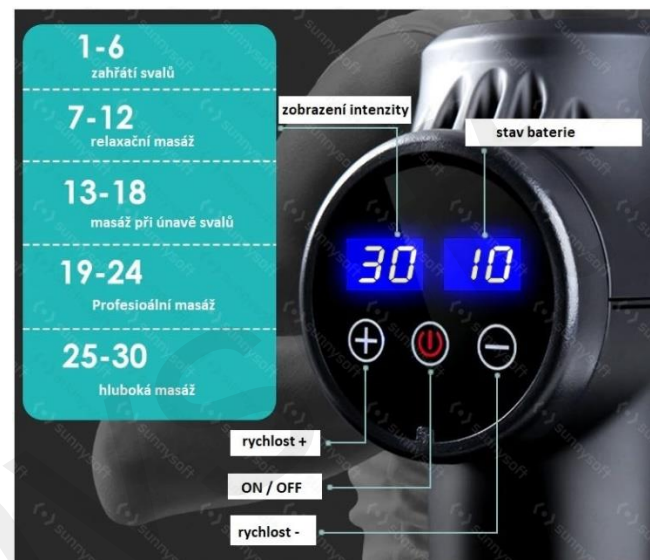

Údržba

Použijte navlhčený hadřík a zařízení otřete. Poté použijte suchý hadřík a vysušte zařízení do sucha.

Před skladováním nebo cestováním, zařízení uložte do cestovního boxu.

Upozornění

Nevkládejte zařízení do vody. Chraňte zařízení před vodou a jinými kapalinami. Ventilační otvory ponechte volné.

Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nemanipulujte.

Zařízení nepoužívejte v kuse více, jak 1 h. Ponechte poté zařízení cca 30 min vychladnout.

Během nabíjení zařízení nepoužívejte.

Zařízení je určeno pouze pro dospělé osoby. Zařízení není hračkou.

Chraňte před dětmi. Použití zařízení konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.

Varování

Zařízení používejte podle následujících instrukcí. Jinak hrozí riziko zásahu elektrického proudu, poranění nebo požáru.

Zařízení je určeno pouze dospělým osobám.

Zařízení použijte pouze na suchou pokožku přes oblečení. Lehce zatlačte.

Po zvolené oblasti pohybujte zařízením po dobu 60 s.

Zařízením přejíždějte pouze po měkkých tkáních/svalech. Pokud vám bude zařízením způsobovat nepohodlí nebo bolest, oblast nemasírujte.

Zařízení nepoužívejte na masáž hlavy nebo kostí.

Použijte pouze přiložené masážní hlavice.

Zařízení nemá způsobit bolest ani modřiny. Pokud se začnou objevovat modřiny, přestaňte zařízením používat. Nevkládejte do prostoru mezi hlavici a zařízením prsty, vlasy nebo jakékoli jiné předměty.

Do otvorů ventilace nevkładejte předměty, ani je ničím nezakrývejte.

Chraňte zařízením před vodou a jinými kapalinami.

Zařízením nabíjejte pouze přiloženým adaptérem.

Před použitím si zařízením prohlédněte. Pokud bude poškozené nebo bude vykazovat během používání abnormality, zařízením přestaňte ihned používat.

Zařízením nevhazujte na zem, ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte.

Během nabíjení nenechávejte zařízením bez dozoru.

Před použitím, konzultujte zařízením se svým ošetřujícím lékařem.

Těhotné ženy, lidé s diabetem, lidé s neuropatií, nebo poškozenou sítnicí, se zlomeninou, lidé po operaci, epilepsií nebo migrénami, kloubními náhradami, poraněním plotének, pohybovým postižením, nebo s jakýmkoliv implantátem, nebo kardio onemocněním (kardio stimulátory) nesmějí zařízením používat. Děti mohou zařízením použít pouze za dozoru dospělé poučené osoby.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz