




# Mi Smart Scale 2

## Uživatelský manuál

Přečtěte si pečlivě tento manuál před použitím a uchovávejte ho pro budoucí použití.

### 01 Instalace baterií

Otevřete kryt baterií a vložte 3 AAA baterie dle označení + a - uvnitř prostoru pro baterie.

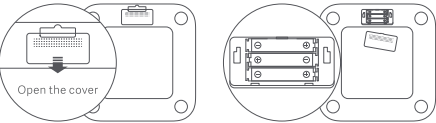

### 02 Propojení s telefonem

1. Naskenujte QR kód pro stažení a instalaci nejnovější verze aplikace Mi Fit nebo ji vyhledejte v obchodě Google Play nebo App Store.



2

### 03 Párování váhy

Otevřete aplikaci Mi Fit, zaregistrujte/přihlaste se, a poté následujte pokyny aplikace. Po spárování váhy s aplikací a zadání osobních dat můžete pomocí aplikace kontrolovat údaje o vážení a sledovat jejich vývoj v čase. Pro získání přesných výsledků zadejte přesné údaje.

### 04 Vážení osob

Umístěte váhu na tvrdý a rovný povrch. Stoupněte si pevně oběma nohama na střed váhy, jak je znázorněno níže. Po zvážení je na displeji zobrazena hmotnost a lze ji také zobrazit v aplikaci Mi Fit na vašem telefonu.



Údaje poskytnuté váhou jsou pouze informativní a nelze je považovat za lékařské doporučení.

3


### 05 Vážení předmětů

Umístěte váhu na tvrdý a rovný povrch. Rukou stiskněte váhu pro zapnutí. Vyčkejte až se na displeji zobrazí "0.00" a poté na váhu položte předmět, který chcete zvážit. Během procesu vážení váhu neposouvajte, jinak bude vážení nepřesné a bude nutné ho opakovat.

### 06 Upozornění

Pokud se na displeji váhy zobrazí blikající symbol "L", znamená to, že baterie jsou vybité a je nutné je vyměnit co nejdříve.

Pokud se na displeji váhy zobrazí blikající symbol "OL", znamená to, že jste překročili maximální měřitelnou hmotnost 150 kg.

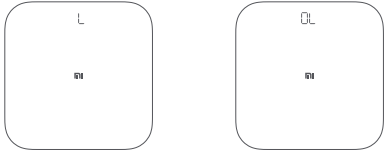

4

### 08 Bezpečnostní opatření

- Nepoužívejte váhu na mokré nebo vlhké podlaze nebo s mokřými nebo vlhkými nohama.
- Při vážení stůjte vždy na středu váhy. Nestoupejte si na kraj váhy.
- Používejte váhu pouze v suchém prostředí. Nevystavujte ji vlhkosti a neponořujte ji do kapalín.
- Pro čištění povrchu váhy používejte pouze vlhký hadřík z mikrovlákna. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky nebo chemikálie.
- Pokud jsou baterie vybité, okamžitě proveďte jejich výměnu. Nenechávejte vybité baterie uvnitř váhy. Při skladování váhy baterie vyjměte.
- Přesnost údajů o složení těla se může výrazně lišit u profesionálních atletů, těhotných žen a dalších osob za speciálních podmínek.
- Váha není určena pro osoby s kardiostimulátorem či jinými zdravotními implantáty.**
- Nerespektováním těchto pokynů může vzniknout škoda na zdraví nebo majetku.**

### 09 Specifikace

Název: Mi Body Smart Scale 2  
Model: XMTZC04HM  
Hmotnost: 1,2 kg  
Rozměry: 280 x 280 x 22 mm  
Rozsah vážení: 100g - 150kg  
Jednotky vážení: kilogramy(kg)/ libry (lbs)  
Krok vážení: 0,1 kg/lbs  
Materiál: Tvrzené sklo, plast  
Napájení: 3x AAA 1,5V baterie  
Frekvence: 2402-2480 Mhz  
Max. výstup: 4 dBm  
Provozní teplota: 0°C až 40°C  
Bezdrátové připojení: Bluetooth 5.0

### 10 Informace o likvidaci a recyklaci



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19 / EU), která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí předáním odpadního zařízení na určené sběrné místo pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní orgány. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací o místě a podmínkách těchto sběrných míst se prosím obraťte na místní úřady.

### 11 Certifikace a bezpečnostní schválení



Společnost Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu XMTZC04HM je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.  
Vyrobeno: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.  
(a Mi Ecosystem company)

Adresa: Room 1201, Building A4, National Animation Industry Base, No. 800 Wangjiang West Road, Gaoxin District, Hefei, Anhui, China

Další informace naleznete na adrese [www.mi.com](http://www.mi.com)