


Výměna hlavice zubního kartáčku Soocas X3U

1) Odejmutí opotřebované hlavice

Vypněte kartáček. Uchopte do jedné ruky rukojeť a do druhé ruky hlavici a tahem rukou od sebe hlavici sejmete.

2) Instalace nové hlavice

Namontujte tlakem hlavici kartáčku na rukojeť a ujistěte se, že mezi oběma částmi je mezera. (Mezera brání hlavici v dotyku s rukojetí. Když rychle vibruje, může to být nepříjemné, a dotyk může také zhoršit výkon motorku. Protože se mohou snadno skrývat v mezeře nečistoty, doporučujeme hlavici kartáčku pravidelně odebírat a čistit.)

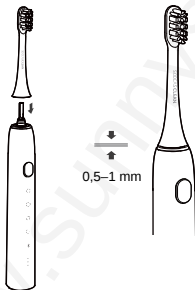

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz