



SOOCAS

Uživatelská příručka

Soocas X5 sonický elektrický zubní kartáček

Důležitá upozornění

 Při prvním použití tohoto produktu může dojít k mírnému krvácení, které může nastat, protože dásně se tomuto vysoce aktivnímu produktu nepřizpůsobí. Příznak krvácení se obvykle zastaví během jednoho až dvou týdnů. Pokud krvácení trvá déle než dva týdny, může to znamenat, že vaše dásně jsou poškozené. Přestaňte produkt používat a poraďte se se svým zubním lékařem.

Varování:

- 1) Uživatelé, kteří trpí zánětem ozubice (periodontitis), byli léčeni zubařem nebo mohou mít jiné nepříjemné příznaky, měli by se před použitím poradit se svým zubním lékařem.
- 2) Elektrický zubní kartáček Soocas X5 splňuje bezpečnostní standardy elektromagnetických zařízení. Máte-li jakékoliv dotazy týkající se kardiostimulátorů nebo s jiných implantátů, tak se před použitím poraďte se svým lékařem nebo výrobcem implantovaného zařízení.
- 3) Tento produkt je určen pouze k čištění zubu, dásní a jazyka. Nepoužívejte jej k žádným jiným účelům. Pokud máte nepříjemné pocity nebo cítíte bolest, přestaňte tento produkt používat a kontaktujte svého lékaře.

* Zákazy:


- 1) Nepoužívejte nabíjecí základnu ve vodě ani v žádné jiné tekutině.
- 2) Po vyčištění se ujistěte, že je zásuvka nabíjecí základny zcela suchá, až poté připojte napájení.
- 3) Produkt je vybaven zabudovanou dobíjecí baterií. Nevhazujte jej do ohně ani jej tam nekládejte, nepoužívejte jej ani jej nedobíjejte v prostředí s teplotou vyšší než 60 °C. V opačném případě může dojít k přehřátí nebo explozi baterie.
- 4) Produkt neupust'te ani s ním netlučte. Pokud zjistíte, že je produkt poškozen, přestaňte jej okamžitě používat.
- 5) Produkt neupravujte, nerozebírejte ani neopravujte.

* Důležité:

- 1) Před použitím produktu zkontrolujte, zda nedošlo k jeho zjevnému poškození. Pokud je poškozený, nepoužívejte jej.
- 2) Před připojením napájení zkontrolujte, zda se napájecí napětí shoduje s napětím vyznačeným na výrobku.
- 3) Pokud došlo/dojde k poškození nabíjecí základny, nepoužívejte ji.




- 4) Pokud se na výrobku vyskytnou známky poškození (rukojeť zubního kartáčku, hlava kartáčku), přestaňte jej používat.
- 5) Nabíjecí základna by neměla být používána v prostředí s vysokou teplotou (např. vystavení přímému slunečnímu záření).
- 6) Nepoužívejte zubní kartáček při sprchování nebo koupání.
- 7) Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí. Děti si s produktem nesmí hrát.

Popis produktu

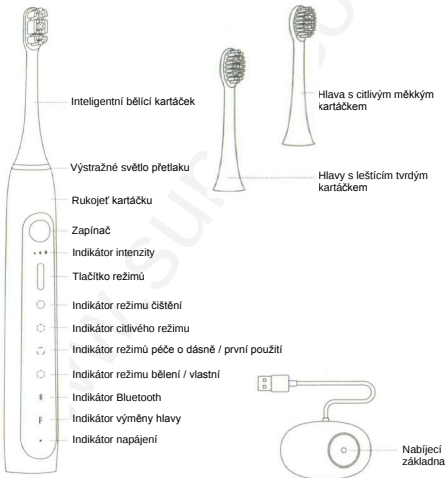

Používání kartáčku

- 1) Namontujte hlavu kartáčku na rukojeť a ujistěte se, že mezi oběma částmi je mezera. (Mezera brání hlavě v dotyku s rukojetí. Když rychle vibruje, může to být nepříjemné, a dotyk může také zhoršit výkon motorku. Protože se mohou snadno skrývat v mezeře nečistoty, doporučujeme hlavu kartáčku pravidelně odebírat a čistit.)
- 2) Navlhčete hlavu kartáčku a vymáčkněte na kartáček přiměřené množství zubní pasty.
- 3) Ved'te kartáček pomalu ze zubu na zub s úhlem 45° mezi štětinami a linií dásní. Pokud dochází při procesu čištění zubů k postupnému oslabování/posilování, je třeba měnit polohu čistění (s výjimkou režimu leštění).

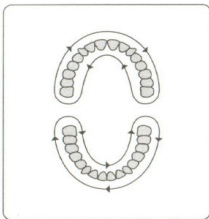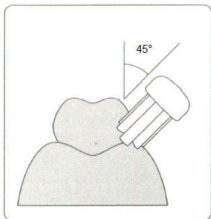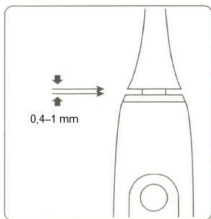

Přepínač zapnutí/vypnutí a nastavení režimu

Zapnutí: Ve vypnutém stavu zapnete kartáček krátkým stisknutím **Zapínače**.

Pauza: V zapnutém stavu dlouze stiskněte **Zapínač** (v pozastaveném stavu krátce stiskněte **Zapínač** pro pokračování v činnosti).

Vypnutí: V zapnutém stavu krátce stiskněte **Zapínač**. Pokud v pozastaveném stavu po dobu 30 s nedojde k žádné činnosti, kartáček se vypne. Pokud za 30 s krátce stisknete **Zapínač**, dojde k restartu na posledně nastavený režim.


V případě zvláštních okolností stiskněte **Zapínač** na 12 sekund a kartáček se restartuje.

Nastavení intenzity: V zapnutém stavu krátkým stisknutím **Tlačítka režimů** nastavte intenzitu v cyklu **slabý** → **střední** → **silný** → **slabý** →




Krátkým stisknutím
Zapínače – Zapnuto/Vypnuto

Slabý → Střední → Silný

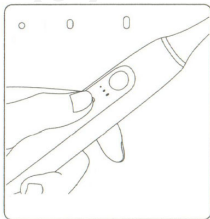


Krátkým stisknutím
Tlačítka režimů – Intenzita

Přepínání režimů: Ve vypnutém stavu, nebo ve stavu pauza krátkým stisknutím **Tlačítka režimů** nastavíte pracovní režim v cyklu **čištění** → **citlivý režim** → **péče o dásně / první použití** → **bělení / vlastní režim** → **čištění** →

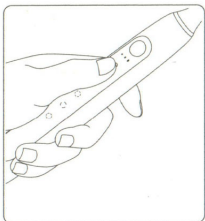


Dlouhým stisknutím
Tlačítka režimů – Režimy

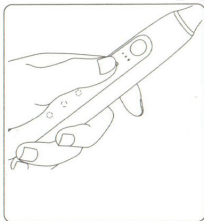

Krátkým stisknutím
Tlačítka režimů – Jednotlivé režimy

Čištění hlavy kartáčku

Po vyčištění zubů vyčistěte kartáček vodou. Po vyčištění vložte kartáček na čisté a dobře větrané místo.

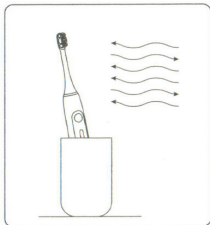

Nabíjení

Po očištění zubního kartáčku jej nasadte na nabíjecí základnu pro nabíjení (směr umístění je znázorněn na obrázku). Indikátor stavu baterie během nabíjení bliká a po úplném nabití baterie svítí. Úplné nabití baterie trvá více než 16 hodin.

Stav	Indikátor napájení	Nabití baterie
Zapnuto	Zeleně svítí	40–100 %
	Červeně svítí	10–40 %
Nabíjení	Zeleně svítí	100 %
	Zeleně pomalu bliká	100–40 %
	Červeně pomalu bliká	<40 %
Nelze spustit	Nízká vibrace, červeně pomalu bliká	10–5 %
	Žádná vibrace, červeně pomalu bliká	<5 %

Pokyny pro nabíjení

- 1) Pokud po použití zubního kartáčku indikátor napájení červeně bliká, nebo kartáček už nelze normálně zapnout, tak to znamená, že je třeba jej nabít.
- 2) Při prvním použití nebo při dlouhodobém nepoužívání nesvítí žádný indikátor nebo nelze kartáček zapnout. Před použitím nabíjejte déle než 12 hodin.
- 3) Pokud nebyl delší dobu používán nebo nebyl po vybití nabit, může být znovu nabit. Až asi po 10 minutách nabíjení se indikátor rozsvítí, je to způsobeno velmi slabou baterií.

Svítí zeleně 100 %
Pomalu zeleně bliká 100–40 %
Pomalu červeně bliká <40 %



Správné uložení kartáčku do nabíjecí základny

Čtyři pracovní režimy



Režim čištění

Hlava kartáčku může vibrovat až 31 000krát za minutu (517 Hz), aby v ústech vytvořila účinné proudění kapaliny a rychle odstranila zubní povlak a skvrny. Tento režim byl vyvinut pro denní čištění.



Citlivý režim

Citlivý režim může účinně čistit zuby a přitom chránit citlivé dásně. Tento režim je vhodný pro uživatele, kteří mají otoky nebo bolesti dásní nebo mají zubní implantát.



Péče o dásně / První použití

Tento režim je určen k masáži citlivých dásní a k provedení příjemnějšího čištění ústní dutiny. Je určen pro lidi, kteří mají problémy, jako je krvácení dásní, vřed v ústech nebo kterým byl právě vytržen zub.

A pokud používáte sonický zubní kartáček SOOCAS X5 poprvé, doporučujeme používat tento režim nepřetržitě po dobu jednoho týdne, aby si vaše zuby a dásně zvykly na změnu z manuálního zubního kartáčku na elektrický.



Bělení / Vlastní nastavení

Zubní kartáček vibruje střídavě 34 800krát za minutu (580 Hz) a 37 200krát za minutu (620 Hz). Tento režim je určen k odstranění skvrn po kouření, čaji, kávy a dalších nechtěných skvrn.


Režim vlastního nastavení lze nastavit pomocí aplikace. Získáte tak více zkušeností s používáním kartáčku.

Ochrana proti přílišnému tlaku a upozornění

Je-li kartáček zapnutý, tak když je tlak na kartáček příliš silný, červeně bliká horní LED **Výstražného světla přetlaku** a vibrační efekt se střídá mezi silným a slabým. To upozorní uživatele, že došlo k přílišnému tlaku na kartáček. Když je tlak snížen, obnoví se provoz do původního stavu a **Výstražné světlo přetlaku** zhasne.

Připomenutí funkce NFC a výměna hlavy kartáčku

1) Hlava kartáčku interně zaznamenává aktuální počet použití. Zaznamenává to pomocí NFC (Near Field Communication = Blízká komunikace), je to bezdrátová komunikace na velmi krátkou vzdálenost (do 4 cm).

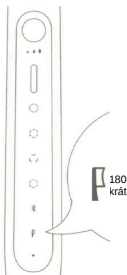


2) Rukojeť kartáčku si při každém zapnutí přečte, kolikrát se NFC uvnitř kartáčkové hlavy přihlásí. Pokud je použita více než 180krát (používáte-li kartáček dvakrát denně, odpovídá to 3 měsícům), měla by být hlava kartáčku vyměněna. **Indikátor výměny hlavy a Výstražné světlo přetlaku** červeně blikají, aby upozornily uživatele na výměnu hlavy kartáčku. Po 5 sekundách blikání se automaticky vypnou, což nijak neovlivní normální použití.

3) Pokud hlava kartáčku není detekována nebo je používána méně než 180krát, při zapnutí napájení se **Indikátor výměny hlavy** nezapne.

4) Pokud je během spouštěcího procesu zjištěno, že počet použití hlavy kartáčku je menší než 180krát, tak pokaždé, když je hlava použita déle než 1 minutu, hlava kartáčku zvětší záznam o použití o jednu.

5) Funkce identifikace hlavy zubního kartáčku pomocí NFC: Umístění čipu NFC je ve spodní části hlavy zubního kartáčku Soocas a na zadní straně chytrého telefonu s funkcí NFC. Přiložte hlavu ke správnému místu chytrého telefonu (do 10 mm) a telefon automaticky rozpozná a zobrazí počet použití hlavy kartáčku.

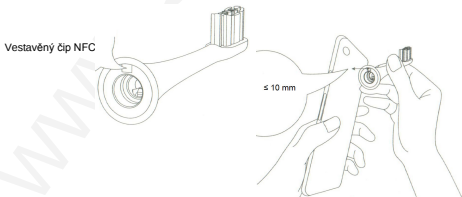

Aplikace do chytrého telefonu

Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci nebo hledejte aplikaci **Soocas** od firmy Soocare Inc. v App Store (pro iOS) nebo Google Play (pro Android).




Hlavní obrazovka

Stáhněte dolů pro
synchronizaci dat

Dnešní bonusové
body za čištění

Analýza dat
dnešního čištění

Zbývající energie
&
Počet dní do
výměny kartáčku

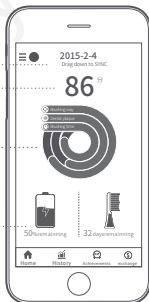


Vyměňte bonusové
body za dárky

Synchronizace dat

Stáhněte si aplikaci, zaregistrujte si svůj účet, a přihlaste se k němu. Zvolte "Moje zařízení" a přidejte kartáček do seznamu zařízení.



Krok 1:
Spusťte v telefonu funkci
Bluetooth a vyhledejte
kartáček SÖOCAS.

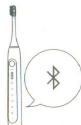

Krok 2:
Jakmile indikátor Bluetooth třikrát
zabliká, stiskněte tlačítko Zapínač.



Krok 3:
Proveďte synchronizaci dat

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rukojeť

Napájení: 3,7 V

Jmenovitý výkon: 2 W

Doba nabíjení: až 16 hodin

Stupeň krytí: IP x7 (chráněno proti ponoření do vody 1 m hluboko)

Nabíjecí stanice

Nabíjecí metoda: indukční

Napájení: 5 V $\overline{\text{--}}$ a 0,5 A

Stupeň krytí: IP x7 (chráněno proti ponoření do vody 1 m hluboko)



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ EU

Elektrické produkty by neměly být likvidovány s domácím směsným odpadem. obraťte se na místní úřad a zjistěte si, kde jsou nejbližší sběrné dvory nebo recyklační kontejnery.



RoHS

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz