



Z1

Sonický elektrický zubní kartáček


Uživatelská příručka

Důležitá varování

- Doporučuje se, aby tento zubní kartáček používaly pouze osoby starší 12 let.
- Při prvním použití zubního kartáčku je normální, že se cítíte trochu nepříjemně.
- Zubní kartáček lze použít pouze se speciální hlavou od firmy Oclean. Nebudeme nést žádnou odpovědnost kvůli použití jakéhokoli příslušenství třetích stran.
- Zubní kartáček je určen pouze pro ústní hygienu. Výrobek by neměl být používán více uživateli.
- Nevystavujte zubní kartáček přímému slunečnímu záření. Vypněte rukojeť kartáčku, pokud jej delší dobu nepoužíváte, také při nabíjení a před čištěním.

Nedoporučuje se používat kartáček

- Osobám, které právě podstoupily orální léčbu. Před použitím tohoto zubního kartáčku se doporučuje, aby se spotřebitel, který trpí onemocněním úst, jako jsou těžce krvácivé dásně, poradil se svým zubním lékařem.
- Zubní kartáček není vhodný pro osoby s omezenými mentálními a fyzickými schopnostmi, pro osoby se zdravotním postižením a osoby, které nemají odpovídající zkušenosti. Produkt by měly používat pod dohledem.

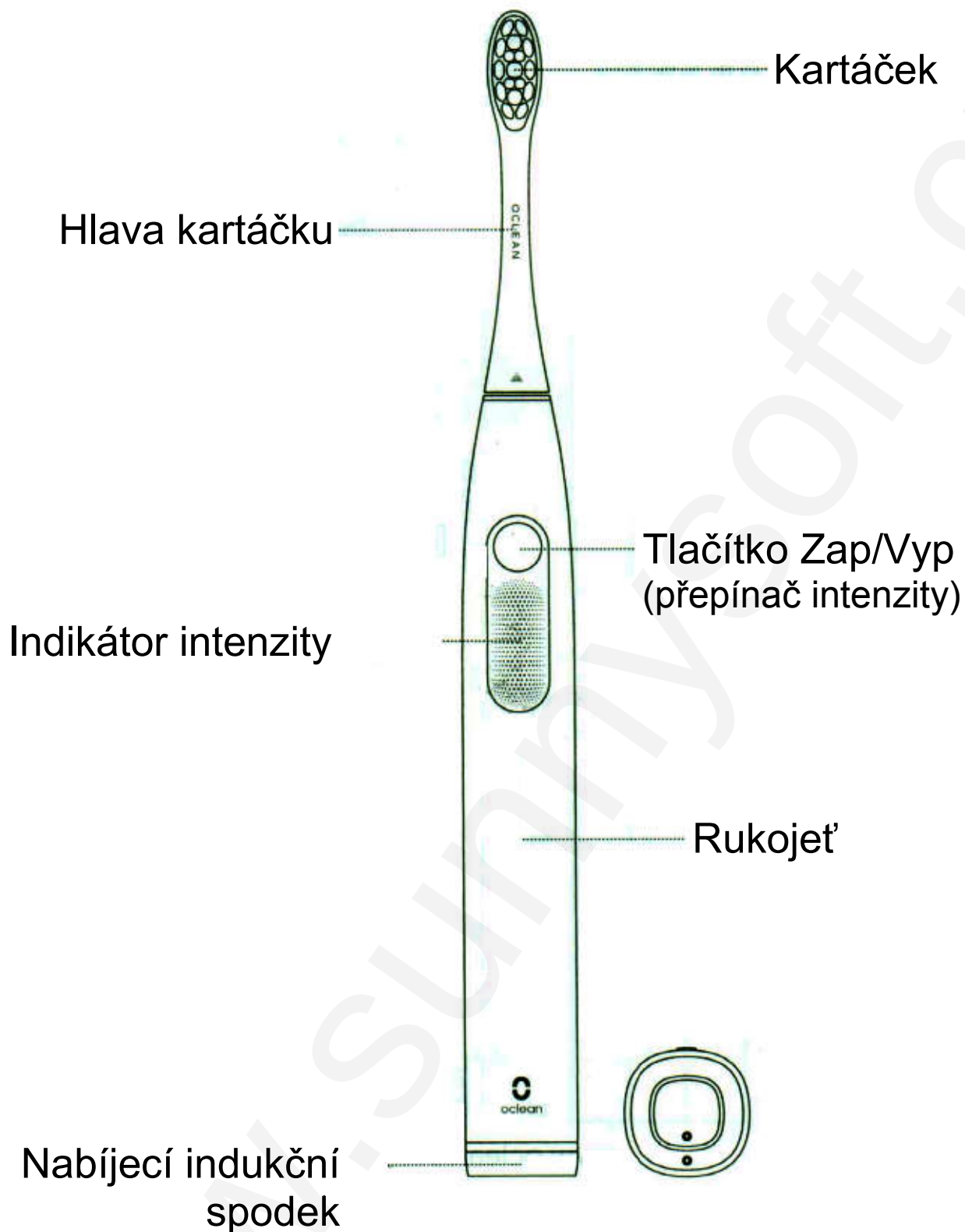

Návod k použití

- První použití

Zubní kartáček lze spustit zcela nový prvním stisknutím tlačítka Zap/Vyp. (Funkce Bluetooth bude aktivována a

zůstane zapnutá.) Po instalaci aplikace Oclean ji spusťte a dokončete připojení a nastavení zubního kartáčku.

- **Nainstalujte si aplikaci a nastavte si zubní kartáček**

Pomocí aplikace si můžete přizpůsobit programy čištění. Aplikace pak automaticky provede proces čištění zubů, bělení zubů a masáže dásní v jedné akci čištění. Při každodenním čištění není třeba aplikaci Oclean spouštět. Místo toho jednoduše spusťte aplikaci každých několik dní, aby se mohla synchronizovat data o čištění.

- **Použití bez nastavení v aplikaci**

Bez nastavení zubního kartáčku v aplikaci Oclean bude zubní kartáček běžet 2 minuty jako při „standardním plánu čištění“, ve kterém každých 30 sekund zubní kartáček uživateli připomene vibracemi potřebu změnit oblast čištění a automaticky se vypne po 2 minutách činnosti.

- **Během provozu si můžete změnit intenzitu**

Intenzitu změníte dlouhým stisknutím tlačítka (2 sekundy). Různý počet světélek představuje vysokou, střední a nízkou intenzitu čištění.

- **Změna oblasti čištění**

Když zubní kartáček pracuje, tak změnou vibrací uživateli připomene, aby každých 30 sekund měnil oblast čištění.

• Intenzita

Když zubní kartáček pracuje, lze intenzitu čištění posoudit podle délky svícení indikátoru intenzity. Pokud svítí pouze jedna svítivá dioda, znamená to, že produkt běží s nižší intenzitou, a když svítí všechny tři diody, znamená to, že běží s vysokou intenzitou.



Nízká intenzita

Úroveň čištění 1–11
Úroveň bělení 1
Úroveň masáže 1
Úroveň citlivosti 1



Střední intenzita

Úroveň čištění 12–24
Úroveň bělení 2
Úroveň masáže 2



Vysoká intenzita

Úroveň čištění 25–32
Úroveň bělení 3
Úroveň masáže 3

• Nízký stav baterie

Pokud indikátor bliká, je nabití baterie nižší než 20 %. Je třeba baterii nabít, aby bylo zajištěno normální používání.

• Stav nabití baterie

Při nabíjení baterie zubního kartáčku ukazuje indikátor blikáním stav nabíjení. Procento nabití lze posoudit podle délky svícení indikátoru.

Indikátor červeně bliká, když je baterie nabitá na méně než 20 %.

Jedna dioda indikátoru bíle bliká, když je baterie nabitá na asi 20–40 %.

Dvě diody indikátoru bíle blikají, když je baterie nabitá na asi 40–70 %.

Tři diody indikátoru bíle blikají, když je baterie nabitá na asi 70–100 %.

Tři diody indikátoru stále svítí bíle, když je baterie plně nabitá.

- **Brushing Plan (Plán čištění) a nastavení aplikace**

Program čištění si můžete vybrat nebo přizpůsobit pomocí podpůrné aplikace Oclean. Můžete také aktualizovat firmware, abyste si průběžně aktualizovali i jeho výkon.

Nabíjení

Umístěte zubní kartáček na nabíjecí základnu, indikátor intenzity začne zobrazovat průběh nabíjení. Baterie kartáčku může být plně nabitá asi za 2 hodiny.

(Doporučené parametry nabíječky jsou 5 V a 1–2 A.)

Důležité rady pro nabíjení

Zubní kartáček podporuje rychlé nabíjení. Doporučuje se, aby byl zubní kartáček umístěn na nabíjecí základnu,

pouze pokud je to nutné. Nenechávejte zubní kartáček na nabíjecí základně na dlouhou dobu, protože by mohlo dojít k předčasnému zestárnutí vestavěné baterie.




1. Neprovádějte demontáž, údery, nebo vhazování do ohně.
2. Pokud se baterie zvětšila, přestaňte zubní kartáček používat.
3. Neukládejte baterii do prostředí s vysokou teplotou.
4. Nepoužívejte baterii, pokud do zařízení vnikla voda.



Doporučená metoda pro čištění zubů

• Doba čištění zubů

Odborníci na zubní hygienu (zubaři) doporučují, aby každé čištění bylo dlouhé 2 až 3 minuty.

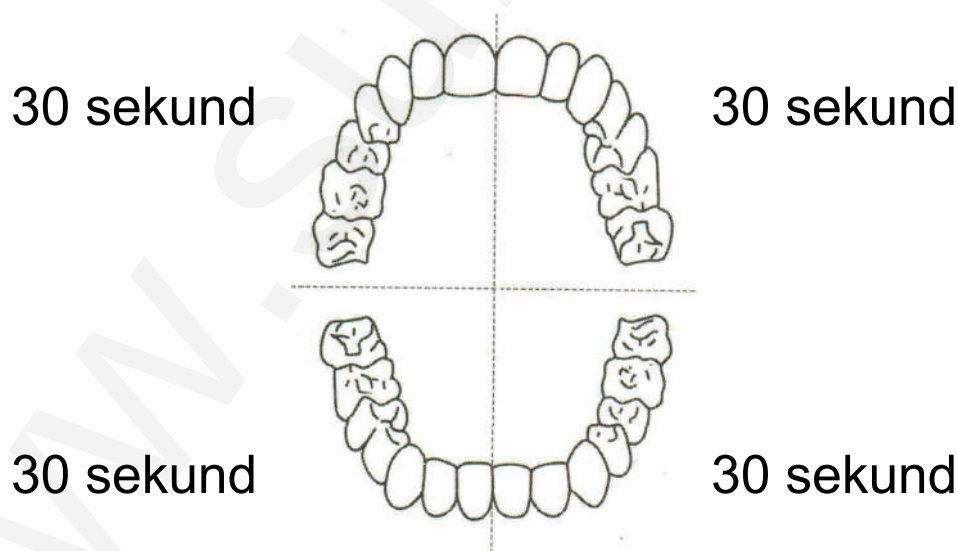

Vně 10 sekund
Zubní korunky 10 sekund
Uvnitř 10 sekund

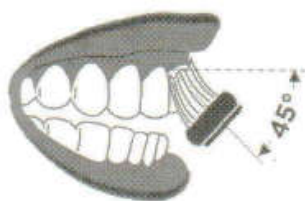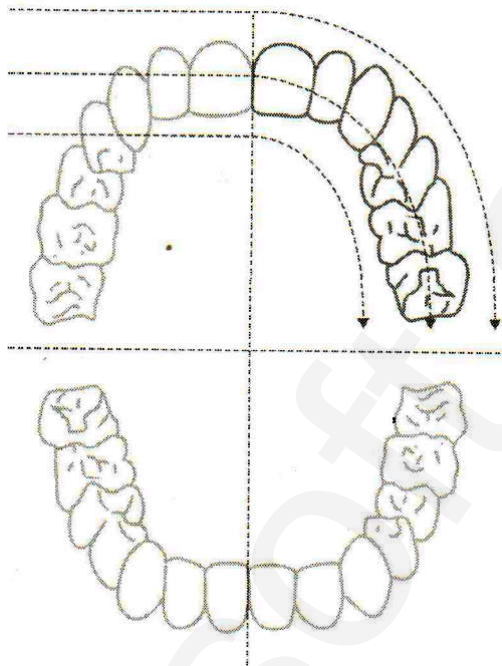

1



2



3



4




5




6


Postup při čištění

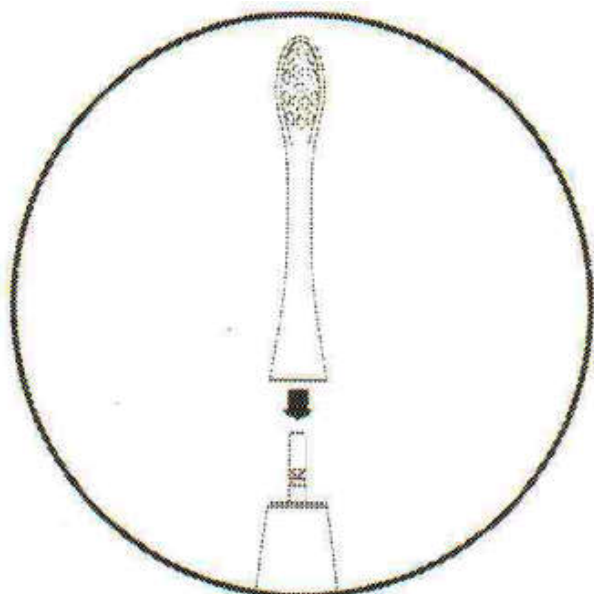


Hlavu kartáčku zasuněte opatrně do rukojeti zubního kartáčku. Mezi hlavou a rukojetí by měla zůstat malá mezera, aby hlava kartáčku mohla normálně vibrovat.

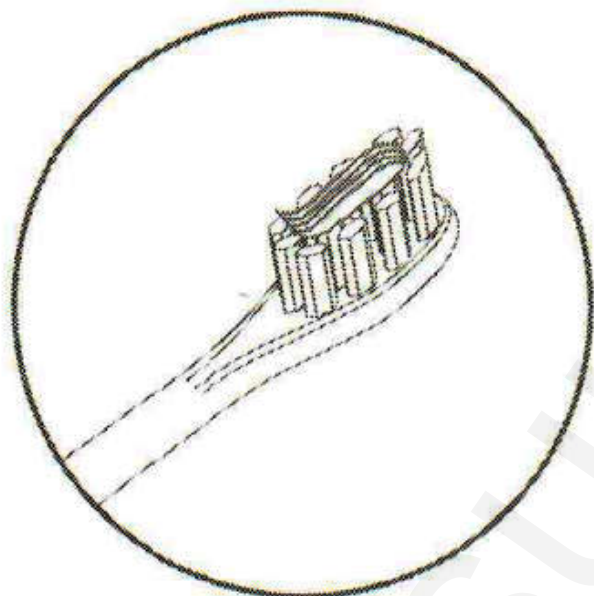


Před použitím kartáčku dejte na hlavu malé množství zubní pasty, abyste zabránili jejímu stříkání. (Sonický elektrický zubní kartáček potřebuje méně zubní pasty než ruční kartáček.)

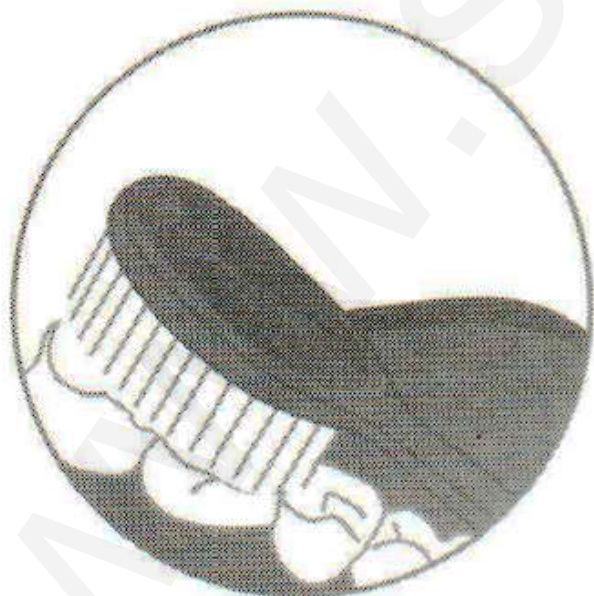


Navlhčete hlavu zubního kartáčku a vložte si ji do úst. Pak teprve zapněte kartáček a začněte s čištěním.

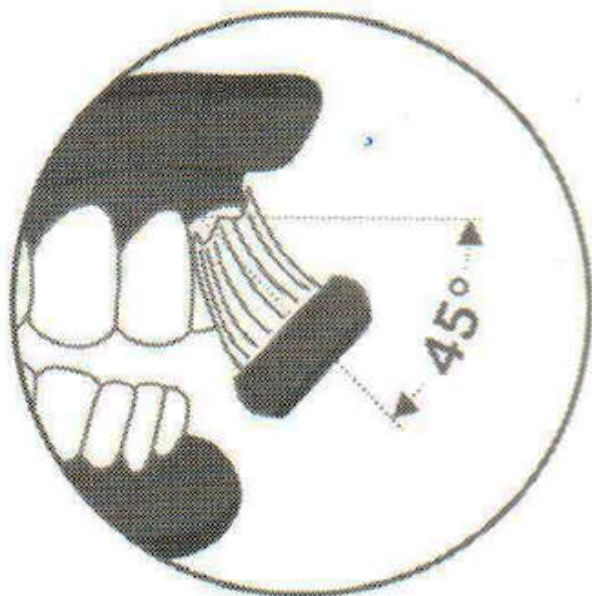

Pomalu nakloňte kartáček na 45° k linii dásní, abyste zuby pořádně vyčistili.

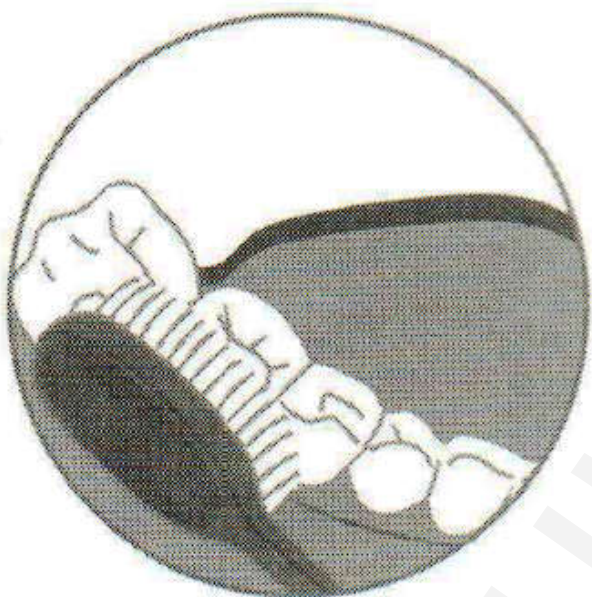

Držte rukojeť zubního kartáčku a pomalu jím pohybujte kruhovým pohybem. Netlačte na něj příliš silně.

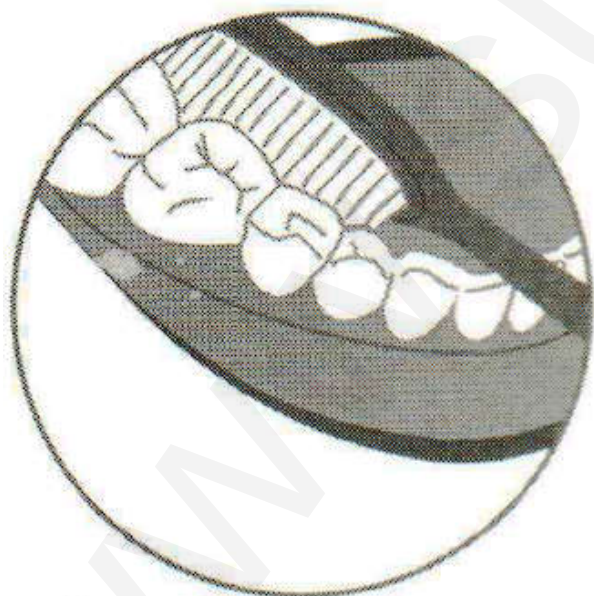


Po vyčištění si vypláchněte ústa čistou vodou.

• Technické parametry

Typ produktu	Oclean Z1
Krouticí moment	220 gf.cm (=0,021 574 63 Nm)
Stupeň krytí	IP x7 (proti ponoření do vody 1 metr)
Příkon	1,8 W
Nabíječka	Oclean USB Cradle
Nabíjení	5 V $\equiv$, 1 A
Pracovní doba	30 dní*)
Kapacita baterie	800 mAh**)
Doba nabíjení	2 hodiny***)
Bluetooth	Bluetooth 5.0 a novější

Čištění a údržba

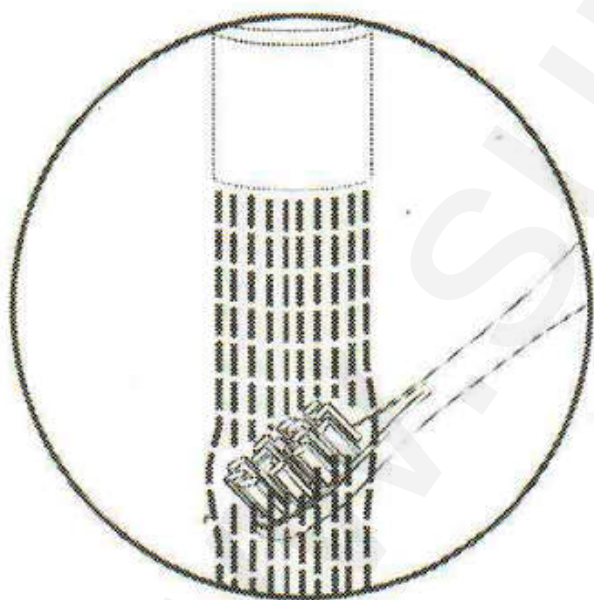


Čištění kartáčové hlavy

Po použití vyčistěte hlavu kartáčku a vysušte ji na vzduchu.

*) Platí při 2minutovém čištění dvakrát denně.


**) Teoreticky má kapacita baterie rozsah od 750 mAh do 850 mAh.

***) Doporučuje se používat USB nabíječku 5 V $\equiv$, 1 A nebo 5 V $\equiv$, 2 A.

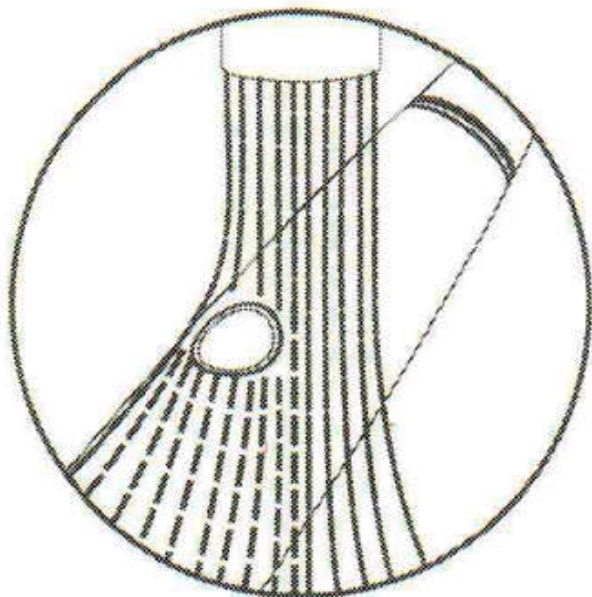

Čištění rukojeti

Očistěte povrch rukojeti čistou vodou, setřete ji měkkým hadříkem a osušte ji vzduchem. Před nabíjením udržujte spodek rukojeti čistý a suchý.

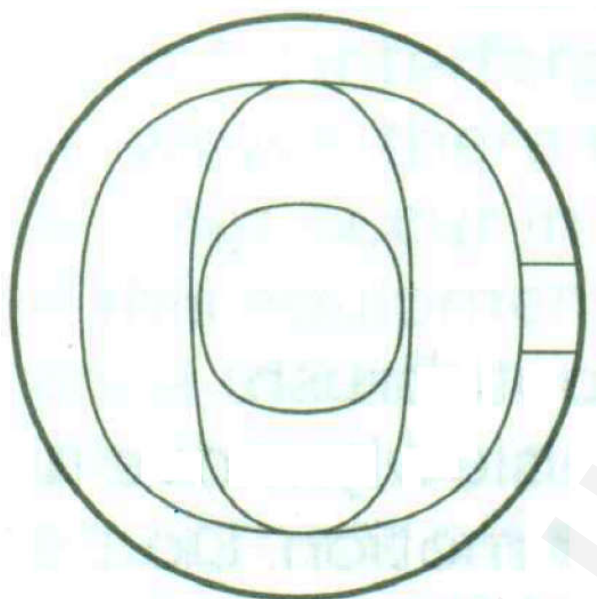

Čištění nabíjecí základny

Znečistěné části nabíjecí základny očistěte měkkým hadříkem. Před čištěním základny odpojte zástrčku baterie ze zásuvky a znovu ji použijte, pouze pokud je základna zcela suchá.



Vyměňte hlavu

Zubaři navrhnou, aby byla hlava kartáčku vyměňována každé 2 až 3 měsíce, aby se udrželo optimální čištění.

• **Běžné problémy a jejich řešení**

Následuje několik běžně se vyskytujících problémů, kterým mohou při používání zubního kartáčku uživatelé čelit. Tyto problémy mohou uživatelé snadno vyřešit pomocí níže uvedených návodů. Než budete kontaktovat profesionální servisní služby, proveďte následující kontroly.

1 Intenzita vibrací slábne.

Možné problémy

- Zubní kartáček je tlačен na zuby příliš silně.
- Mezera mezi hlavou kartáčku a rukojetí je příliš velká nebo příliš úzká.

Řešení

- ✓ Hlavu kartáčku přiložte na zuby jen lehce.
- ✓ Vyjměte hlavu kartáčku z rukojeti, nasadte ji zpět na výstupní hřídel, přičemž mezi kartáčovou hlavou a rukojetí musí být zachována určitá vzdálenost.

2 Kartáček na zuby může fungovat pouze krátkou dobu

Možné problémy

- Nabíjecí základna není v dobrém kontaktu se spodní částí rukojeti, to může mít za následek nesprávné nabíjení.

- Nedostatečný výkon.

Řešení

- ✓ Vyčistěte nabíjecí základnu.
- ✓ Nabíjejte delší dobu.
- ✓ Baterie dosáhla konce své životnosti.

3 Zubní kartáček nefunguje

Možné problémy

- Napájení rukojeti zubního kartáčku je nedostatečné.

Řešení

- ✓ Nabijte zubní kartáček.
- ✓ Chcete-li vyměnit baterii, obraťte se na servisní středisko.


Pro podrobné informace je email: **service@oclean.com**.

Oclean má i Facebook:

www.facebook.com/ocleanofficial

Instalace aplikace Oclean


Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci nebo hledejte aplikaci Oclean v App Store (pro iOS) nebo v Google Play (pro Android).

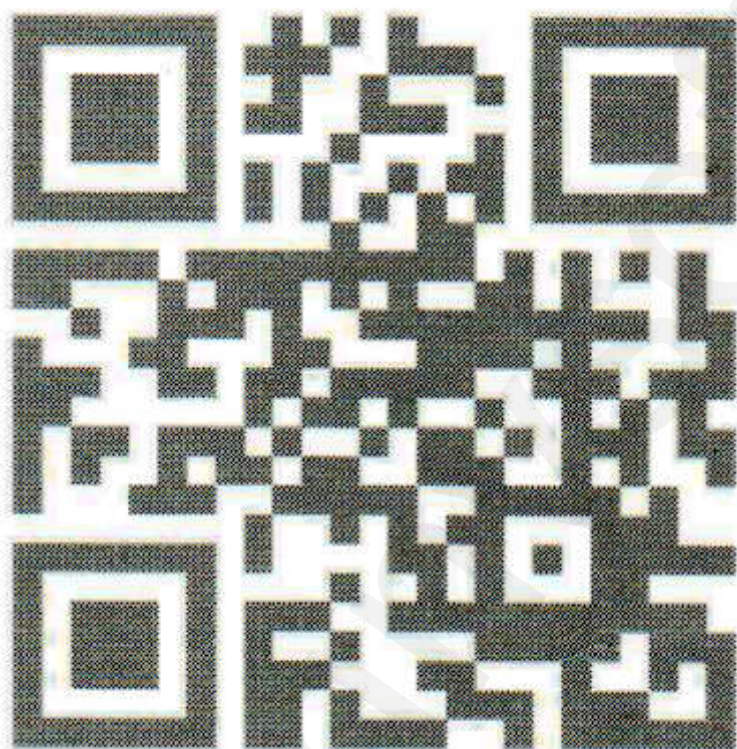

Aplikaci si také můžete stáhnout z webových stránek výrobce: **www.oclean.com/download**



RoHS

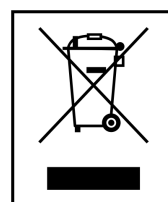

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz