


Oclean Smart Sonic Touch Screen Electric Toothbrush

OCLEAN X PRO



Uživatelský manuál

Popis

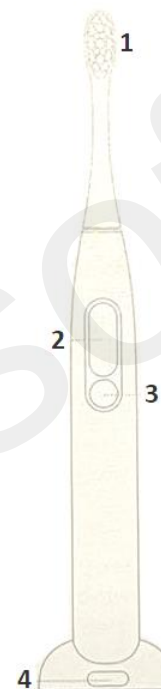

1 Hlava: při výměně nástavců, původní nástavec vyjměte ve vertikální poloze (neotáčejte s ním). Zubaři doporučují výměnu nástavců každé 2-3 měsíce.

2 Dotykový displej: možnost stisknutí – nahoru/dolů a doprava/doleva. Stiskněte pomocí palce.

3 Zapnout/Vypnout: během provozu krátce stiskněte – pauza, poté stiskněte po dobu 15 s – opět zapnutí, opětovné stisknutí po dobu 15 s – režim spánku.

4 Nabíjecí stanice 2 v 1 (přípevnění na stěnu)

První použití


Krátce stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout a aktivujte kartáček (také aktivace Bluetooth). Kartáček přejde poté automaticky do pohotovostního režimu. Stáhněte si aplikaci a proveďte osobní nastavení.

Plán čištění

Kartáček má přednastavený plán čištění na 2 min. Změnu doby čištění lze změnit v aplikaci. Každých 30 s, kartáček pomocí vibrace upozorní na změnu čistící plochy. Po 2 min, kartáček přestane čistit.

Nabíjení

Před nabitím, kartáček řádně vysušte. Kartáček nabíjejte pouze ve chvíli, kdy je kapacita baterie nízká. Zbytečně kartáček nepřebíjejte.

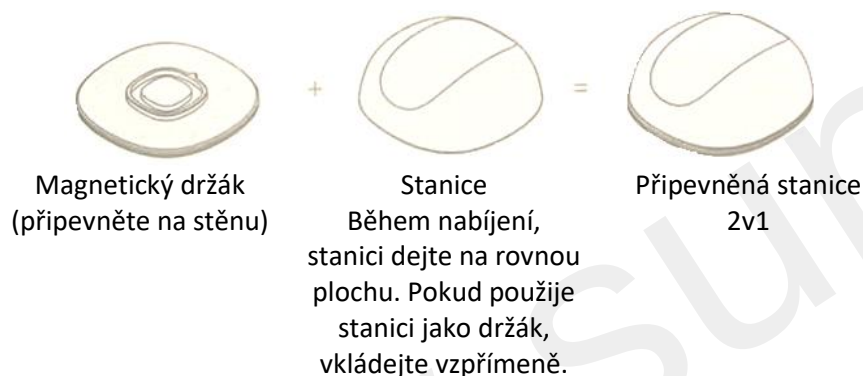

Poznámka

Při instalaci magnetického držáku, malé šipky musí směřovat nahoru.

Typy

Kartáček je určen pro osoby starší 12 let. Nástavce používejte pouze takové, které jsou určené pro Oclean. Kartáček používejte pouze pro osobní potřebu. Kartáček je určen pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte ho přímým slunečním paprskům. Udržujte ho v suchu a

v dobře větraném prostoru. Základnu i kartáček udržujte stále suchý, hlavně během nabíjení.

Nedoporučuje se

kartáček používat pokud jste po operaci úst, máte nějaké onemocnění typu rakovina ústní dutiny, paradentózu, jiné nemoci ústní dutiny.

Konzultujte se svým lékařem.

Dále lidem s psychickými nebo mentálními potížemi, mající umělé zuby, anebo lidem s citlivými zuby.

Instalace aplikace

Vyhledejte a nainstalujte aplikaci Oclean . Aplikaci naleznete v internetovém obchodě Google Play (Android) nebo Apple Store (iOS). V aplikaci lze nastavit: automatické čištění, bělení zubů a masáž dásní. Není potřeba aplikaci pouštět při každém čištění. Jednou za pár dní, kartáček synchronizujte.

Kartáček lze také použít bez předchozího spárování s aplikací.

Po vyčištění zubů, na displeji bude zobrazen čas čištění, body a čistící plocha.


Záznam pak lze zobrazit v aplikaci (nejprve je potřeba prostřednictvím Bluetooth spojit kartáček s aplikací. Poté lze data analyzovat v aplikaci. Data jsou k dispozici 7 dní, poté budou nahrazeny dalšími.

Režim nastavení

Přejděte do režimu nastavení – přejed'te prstem na displeji nahoru a dolů. Každá funkce: čištění, bělení a masáž mají 32 různých úrovní citlivosti. Intenzita čištění: sjed'te prstem na displeji nahoru/dolů – nastavení intenzity (o +1 nebo -1). Přejed'te prstem bokem doprava/doleva změna o +5 nebo -5 .



Přejeďte prstem nahoru/dolů nebo doprava/doleva

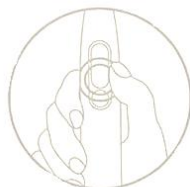

Krátké nebo dlouhé stisknutí displeje - potvrzení nastavení/zapnutí/vypnutí



Nastavení času, spojení s aplikací, synchronizace, kartáček se sám automaticky po spojení aktualizuje

Aplikace

V aplikaci lze nastavit uživatelské nastavení a provést aktualizaci firmwaru.

Nízký stav baterie

Ve chvíli, kdy je stav baterie menší než 20 %, symbol vybité baterie bude zobrazen. Pod 1 %, kartáček zavibruje a následně se vypne.

Nabíjení

Vyjměte nabíjecí stanici z magnetického držáku. Stanici poté spojte s nabíjecím kabelem a adaptérem (adaptérem na mobilní telefon). Opatrně vložte spodní část kartáčku do stanice. Kartáček sám dosedne do kontaktů. Na displeji bude zobrazen stav nabíjení. Nabíjení trvá cca 2 h.

Technika čištění



Údržba

Čištění hlavy: opláchněte vodou a vysušte vzduchem. Netahejte za štětiny.

Nabíjecí stanice: špinavé části otřete suchým hadříkem, před čišťením, stanici vyndejte ze zdroje napětí. Čistou stanici pak opět vložte do zdroje napětí a nabíjejte.

Magnetický držák: čistěte suchým hadříkem, před nabíjením vždy osušte.

Specifikace

Název: Oclean Smart Sonic Touch Screen Electric Toothbrush

Model: Oclean X

Edice: Pro

Maximální výstup: 0dBm

Voděodolný: IPX7

Napětí: 1.8 W

Nabíjení: USB

Vstup: 5V=1A

Životnost baterie: 20 dní (úroveň 1), 40 dní (úroveň 32)

Kapacita baterie: 800 mAh

Doba nabíjení: 2 h

Bluetooth: 4.2 a vyšší

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz