

Elektrische Zahnbürste, Dida DT1056/DT1056A



Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Verwendung sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

1. Parameter

Modell	DT1056	DT1056A
Eingang	5 V – 1 A	
Batterie	1200 mAh	
Stromspannung	3,7 V	
Leistung	2W	
Wasserdichtigkeit	IPX7	
Stromversorgung	USB-C	Induktion

2. Produktdiagramm

1 Ein-/Aus-Taste

2 Krafteinstellung

3 Anzeige der Krafteinstellung (Fortschritt)

4 Reinigungsmodus

5 Weißmodus

6 Aktualisieren – Soft-Repair-Modus


7 Batterieanzeige

8 Es wird empfohlen, in den ersten zwei Wochen bei der Einführung des Schallzahnbürstens die sanfteste Putzstärke zu verwenden.

Modell DT1056

9 Ladeanschluss

10 Ladekabel


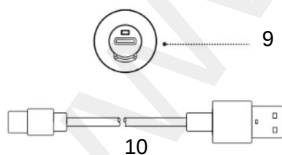


Modell DT1056A

11 Bürstenbasis

12 Ladestation

13 Ladekontakte

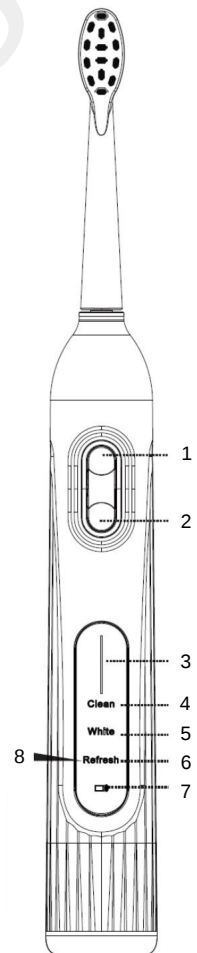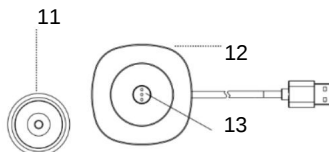

DT1056:

Kann mit einem Standard-USB-C-Kabel aufgeladen werden, das an einen Adapter oder Computer angeschlossen ist.


DT1056 und DT1056A:

Stellen Sie vor dem Aufladen der Zahnbürste sicher, dass jeglicher Schmutz aus dem Kontaktbereich zwischen Zahnbürste und Basis entfernt wird.

3. Nutzung

Anbringen des Bürstenkopfes am Griff

Setzen Sie den Bürstenkopf auf den Bürstengriff und achten Sie darauf, dass zwischen den beiden Teilen ein kleiner Abstand besteht. (Der Spalt soll dafür sorgen, dass der Bürstenkopf bei hochfrequenten Vibrationen nicht an das Griffstück der elektrischen Zahnbürste stößt und der Motor so mehr Leistung hat.)

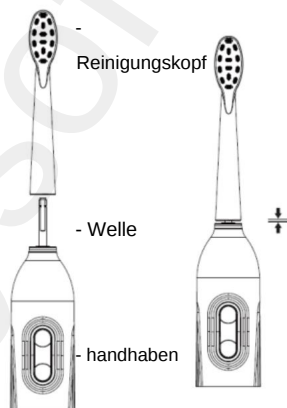

Zahnpasta auftragen

Befeuchten Sie die Borsten und drücken Sie die Zahnpasta gleichmäßig auf den Bürstenkopf.

Bürstenbetrieb

1) Einschalten

Und. Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche am Produkt, um es einzuschalten.

B. Nach dem Start wird automatisch der zuletzt verwendete Modus ausgewählt.

C. Das Produkt läuft die ersten 2 Sekunden mit niedriger Geschwindigkeit, um Zahnpastaspritzer zu vermeiden, und schaltet nach 2 Sekunden auf normale Geschwindigkeit um. D. Nach dem Starten der Zahnbürste beträgt die Gesamtlaufzeit der Zahnbürste 2 Minuten mit kurzen Pausen alle 30 Sekunden als Erinnerung zum Wechseln des Putzbereichs.

2) Modus

A. Drücken Sie nach dem Einschalten der Reinigung 5 Sekunden lang die Einschalttaste. Diese Zahnbürste bietet 3 Reinigungsmodi.

B. Informationen zur Modusauswahl finden Sie im Produktdiagramm.

C. Der Standardmodus ist Aktualisieren – Soft Repair.

3) Geschwindigkeitsumschaltung

Und. Wenn es sich 2 Sekunden nach dem Einschalten im Normalbetrieb befindet, drücken Sie die Leistungseinstelltaste, um die Reinigungsleistung umzuschalten. Es stehen 7 Stufen zur Verfügung und durch langes Drücken der Kraftverstelltaste können Sie die Geschwindigkeit stufenlos vor und zurück verändern.

B. Nach dem Umschalten der Geschwindigkeit leuchtet die entsprechende Geschwindigkeitsanzeige auf.

C. Die Standardeinstellung ist die 3. Geschwindigkeit.

4) Herunterfahren

Nachdem Sie die Starttaste 5 Sekunden lang gedrückt haben, wird der Abschaltzustand aktiviert.

5) Reinigungskraft-Speicherfunktion

Wenn Sie die Starttaste drücken, um es einzuschalten, werden der zuletzt verwendete Modus und die zuletzt verwendete Geschwindigkeit aktiviert.

6) Batterie- und Ladeerinnerung

Und. Nach dem Einschalten leuchtet die Betriebsanzeige (grünes Licht). Wenn die Batteriekapazität weniger als 10 % beträgt, blinkt die Betriebswarnleuchte. Laden Sie Ihr Gerät rechtzeitig auf

B. Während des Ladevorgangs kann das Gerät weder eingeschaltet noch verwendet werden.

C. Die Ladezeit beträgt ungefähr 5 Stunden. Die Akkuanzeige (rot) blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet grün, wenn der Akku vollständig geladen ist. Trennen Sie das Ladekabel rechtzeitig, um eine Überladung zu vermeiden.

D. Wenn der Akku leer ist, muss er länger als 15 Minuten geladen werden, bevor das Gerät wieder eingeschaltet werden kann.


Tipps:

Um Zahnpastaspritzer zu vermeiden, befeuchten Sie zunächst die Borsten der Zahnbürste, tragen Sie eine angemessene Menge Zahnpasta auf, nehmen Sie die Zahnbürste in den Mund und schalten Sie sie dann ein.

Üben Sie keinen Druck auf den Bürstenkopf aus, da dies zu einer Funktionsbeeinträchtigung der Bürste führt. Bewegen Sie die Bürste leicht und im richtigen Winkel zur Zahnfleisch-Zahn-Grenzfläche.

4. Richtiges Zähneputzen

- Platzieren Sie den Bürstenkopf in einem 45-Grad-Winkel an der Verbindungsstelle zwischen Zähnen und Zahnfleisch und drücken Sie die Taste, um die elektrische Zahnbürste einzuschalten.

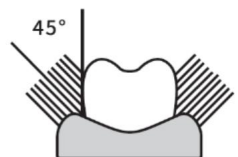

- Bewegen Sie den Bürstenkopf sanft und in kleinen Schritten zwischen Ihren Zähnen hin und her und bewegen Sie ihn während des gesamten Putzvorgangs kontinuierlich.
- Die elektrische Zahnbürste pausiert alle 30 Sekunden, um Sie daran zu erinnern, den nächsten Bereich/Quadranten Ihres Mundes zu reinigen. Wenn sich die elektrische Zahnbürste automatisch abschaltet, bedeutet dies, dass die empfohlene Putzdauer erreicht ist.
- Um Spritzer von Zahnpastaschaum zu vermeiden, schalten Sie die elektrische Zahnbürste aus, bevor Sie sie aus dem Mund nehmen.

Beachten:

Auch wenn Sie gesunde Zähne und Zahnfleisch haben, kann es bei der ersten Verwendung der Zahnbürste zu leichtem Zahnfleischbluten kommen. Diese Blutung sollte innerhalb von zwei Wochen abklingen. Nach dieser Zeit gewöhnt sich das Zahnfleisch an die Verwendung einer Zahnbürste. Wenn das Blutungsproblem weiterhin besteht, verwenden Sie die Zahnbürste nicht mehr und wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt.

5. Bürstenkopfpflege

Reinigen Sie den Bürstenkopf nach dem Zähneputzen mit klarem, warmem Wasser und wischen Sie den Griff mit einem weichen Tuch ab. Anschließend trocken lagern.

Warnung

Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf offensichtliche Schäden. Wenn Schäden auftreten oder das Gerät durch einen Sturz schwer beschädigt wurde, verwenden Sie es nicht.

Personen, die sich vor Kurzem einer Mund- oder Zahnfleischoperation unterzogen haben oder sich in Behandlung befinden, wird empfohlen, vor der Verwendung dieses Produkts einen Zahnarzt zu konsultieren.

Wenn bei Ihnen andere Symptome im Mundbereich auftreten, beispielsweise geschwächte Zähne oder ständiges Zahnfleischbluten, wenden Sie sich vor der Verwendung dieses Produkts an einen Zahnarzt.

Personen mit empfindlichen und brüchigen Zähnen sollten vor der Verwendung dieses Produkts ihren Zahnarzt konsultieren.

Bei der ersten Anwendung dieses Produkts kann es bei manchen Benutzern zu Juckreiz, Kribbeln oder Zahnfleischbluten kommen. Keine Sorge, das verschwindet normalerweise nach zwei Wochen. Wenn es länger anhält, suchen Sie einen Arzt auf.

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Körperreinigungsprodukt. Bitte verwenden Sie es nicht bei mehreren Personen. Setzen Sie das Produkt nicht dem Sonnenlicht aus. Versuchen Sie, es nicht für längere Zeit einer feuchten Umgebung auszusetzen. Es sollte in einer belüfteten Umgebung bei einer Temperatur von 7-40 gelagert werden Grad.

Wasserdicht gemäß IPX-7-Niveau, beinhaltet keine wirksame Isolierung gegen heißes Wasser und Dampf, bitte nicht in der Badewanne oder Dusche verwenden.

Wenn Sie nach der Verwendung Beschwerden oder Schmerzen verspüren, beenden Sie die Verwendung des Geräts sofort und suchen Sie einen Arzt auf. Wenn Sie unter gesundheitlichen Beschwerden leiden, konsultieren Sie vor der Verwendung dieser elektrischen Zahnbürste Ihren Arzt. Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren oder Personen mit geistiger Behinderung und Bedienunfähigkeit geeignet.

Überprüfen und reinigen Sie den Ladeanschluss regelmäßig, um die Ansammlung von Staub und Schmutz zu verhindern, da dies die Isolierwirkung verringert und zu unerwünschten Folgen wie Überhitzung führt.

Entsorgen Sie gebrauchte Griffe und Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften zum Recycling und zur Entsorgung kleiner Haushaltsgeräte.

Dieses Produkt ist nur zur Mundreinigung bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke. Wenn Sie Beschwerden oder Schmerzen verspüren, beenden Sie die Anwendung dieses Produkts und suchen Sie einen Zahnarzt auf.

Verändern oder reparieren Sie dieses Produkt nicht.

Um die Sicherheit zu gewährleisten, müssen Personen mit eingeschränkten physischen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen dieses Produkt unter Aufsicht oder Anleitung einer anderen Person verwenden. Erlauben Sie Kindern nicht, unbeaufsichtigt ihre Zähne zu putzen oder Wartungsarbeiten am Produkt durchzuführen. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf. Beaufsichtigen Sie Kinder und verhindern Sie, dass sie mit dem Produkt spielen.

Platzieren Sie dieses Produkt in einer belüfteten und trockenen Umgebung und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, Feuer und andere wärmeabgebende Objekte.

Wenn Sie Fragen zu Herzschrittmachern oder anderen implantierten Geräten haben, wenden Sie sich vor der Verwendung des Produkts an Ihren Zahnarzt oder den Hersteller des implantierten Geräts.

Umweltschutz:

Die wiederaufladbare Lithiumbatterie in diesem Produkt kann umweltschädliche Stoffe enthalten. Bevor Sie dieses Produkt entsorgen oder zu einer staatlich ausgewiesenen Recyclinganlage bringen, entfernen Sie unbedingt zuerst die Batterie und senden Sie sie an eine ausgewiesene Recyclinganlage. Wenn Sie die Batterie nicht entfernen können, können Sie das Produkt an das Kundendienstzentrum zurückgeben.

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9

Tschechische Republik

www.sunnysoft.cz