

# **Elektromos fogkefe, Dida DT1056/DT1056A**



**Felhasználói kézikönyv**

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.

## 1. Paraméterek

|               |          |          |
|---------------|----------|----------|
| Modell        | DT1056   | DT1056A  |
| Hozzáférés    | 5V - 1 A |          |
| Akkumulátorok | 1200 mAh |          |
| Feszültség    | 3,7 V    |          |
| Teljesítmény  | 2 W      |          |
| Vízálló       | IPX7     |          |
| Teljesítmény  | USB-C    | Indukció |

## 2. Termékdiagram

1 Be/Ki gomb

2 Erőbeállítások

3 Erő (előretolás) beállítási jelző

4 Tiszta üzemmód

5 Fehér üzemmód

6 Frissítési mód - Lágy javítás


7 Akkumulátor kijelző

8 Az első két hétben a tisztítás bevezetésekor ajánlott szonikus kefe a legkíméletesebb tisztítóerő használatához.

### DT1056 modell

9 Töltőport

10 töltőkábel


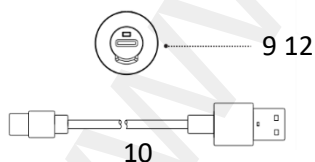


### DT1056A modell

11 A kefe alja

12 Töltőtálc

13 Töltő érintkezők

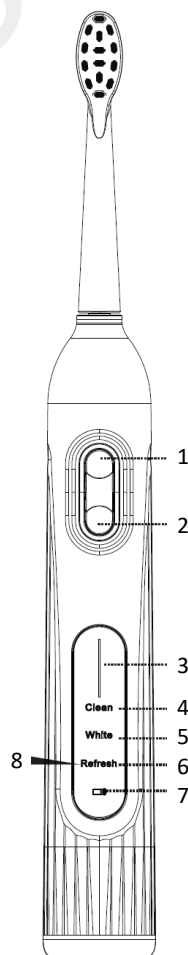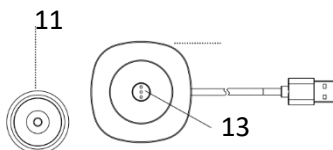

DT1056:

Egy adapterhez vagy számítógéphez csatlakoztatott szabványos USB-C kábellel tölthető.

DT1056 és DT1056A: A

fogkefe feltöltése előtt győződjön meg róla, hogy a fogkefe és a fogkefe talpának érintkezési pontjáról eltávolította a szennyeződéseket.


### 3. A használata

#### A kefefej felhelyezése a nyélre

Helyezze a kefefejet a kefe nyelére, és győződjön meg róla, hogy a két rész között van egy kis rés. (A rés biztosítja, hogy a kefefej ne ütközzön az elektromos fogkefe fogantyújához a nagyfrekvenciás rezgések során, hogy a motor nagyobb teljesítményt kapjon).

#### Alkalmazzon fogkrémet

Nedvesítse be a sörtéket, és nyomja egyenletesen a fogkrémet a kefefejre.

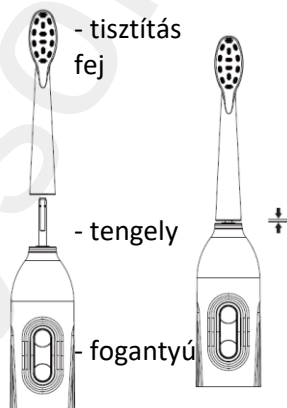

#### A kefe működése

##### 1) Bekapcsolás

- Kattintson a termék indítógombjára a bekapcsoláshoz.
- A legutóbb használt üzemmód automatikusan kiválasztásra kerül az indítás után.
- A termék az első 2 másodpercben alacsony fordulatszámon fut, hogy megakadályozza a fogkrém kifröccsenését, majd 2 másodperc után normál fordulatszámra kapcsol.
- A fogkefe elindítása után a fogkefe teljes futási ideje 2 perc, 30 másodpercenként rövid szünetekkel, amelyek emlékeztetőül szolgálnak a tisztítási terület cseréjére.

##### 2) Mód

- A tisztítás bekapcsolása után 5 másodpercig nyomja meg a bekapcsológombot. Ez a fogkefe 3 tisztítási módot kínál.
- Az üzemmód kiválasztásához lásd a termékdiagramot.
- Frissítés - A Soft Repair üzemmód alapértelmezettként van beállítva.

### 3) Sebességváltás

- a. Normál üzemmódban a bekapcsolás után 2 másodperccel nyomja meg a teljesítménybeállító gombot a tisztítási teljesítmény átkapcsolásához. 7 fokozat van, és az erőbeállító gomb hosszan történő megnyomásával a sebességet előre-hátra folyamatosan változtathatja.
- b. A sebesség átkapcsolásakor a megfelelő sebességjelző világít.
- c. Az alapértelmezett sebesség 3.

### 4) Leállítás

A start gomb 5 másodpercig tartó megnyomása után a készülék kikapcsolt állapotba kerül.

### 5) Teljesítménymemória funkció tisztítása

A bekapcsoláshoz a start gomb megnyomásával az utoljára használt üzemmód és sebesség aktiválódik.

### 6) Akkumulátor-emlékeztető és töltés

- a. Bekapcsolás után a tápellátás jelzőfénye (zöld fény) világít, ha az akkumulátor kapacitása kevesebb, mint 10%, a tápellátás figyelmeztető fénye villog; töltse fel a készüléket időben.
- b. A készüléket nem lehet bekapcsolni és használni töltés közben.
- c. A töltési idő körülbelül 5 óra. Az akkumulátor fénye töltés közben villog (piros), és az akkumulátor fénye zöldre vált, amikor teljesen feltöltődött. A túltöltés elkerülése érdekében időben húzza ki a töltőkábelt.
- d. Ha az akkumulátor lemerült, több mint 15 percre kell tölteni, mielőtt a készülék újra bekapcsolható lenne.

### *Tippek:*

A fogkrém kifröccsenésének elkerülése érdekében először nedvesítse meg a fogkefe sörtéit, kenjen rá megfelelő mennyiségű fogkrémet, helyezze a fogkefét a szájába, majd kapcsolja be a fogkefét.

Ne gyakoroljon nyomást a kefefejre, mert a kefe nem fog megfelelően működni. A kefét könnyedén és a megfelelő szögben mozgatja a fogíny és a fogak közötti határfelülethez.


## 4. Megfelelő fogmosás

- Helyezze a kefefejet a fogak és az íny találkozásánál 45 fokos szögben, és nyomja meg a gombot az elektromos fogkefe bekapcsolásához.

- A kefefejet kis lépésekben óvatosan, előre-hátra mozgatva, folyamatosan mozgatva a fogmosási ciklus alatt a fogak között.

- Az elektromos fogkefe 30 másodpercenként szünetet tart, hogy emlékeztesse Önt a száj következő területének/négyzetének tisztítására. Amikor az elektromos fogkefe automatikusan kikapcsol, ez azt jelenti, hogy az ajánlott tisztítási idő elérte a kívánt időtartamot.

- A fogkrémhab fröccsenésének elkerülése érdekében kapcsolja ki az elektromos fogkefét, mielőtt kivenné a szájából.

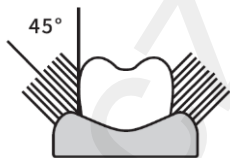

#### **Figyelmeztetés:**

A fogkefe első használatakor még egészséges fogak és íny esetén is előfordulhat, hogy az ínye enyhén vérzik. Ennek a vérzésnek két héten belül el kell múlnia. Az ínye ezután hozzászokik a fogkefe használatához. Ha a vérzés továbbra is fennáll, hagyja abba a fogkefe használatát, és forduljon fogorvosához.

## **5. Kefefej ápolása**

Kefélés után tisztítsa meg a kefefejet tiszta meleg vízzel, és törölje át a fogantyút puha ruhával. Ezután tárolja száraz helyen.

#### **Figyelmeztetés**

Minden használat előtt ellenőrizze a berendezést, hogy nincsenek-e rajta nyilvánvaló sérülések. Ne használja a készüléket, ha sérülések vannak rajta, vagy ha esés következtében súlyosan megsérült.

Azoknak, akik nemrégiben szájsebészeti vagy ínyműtéten estek át, vagy kezelés alatt állnak, ajánlott a termék használata előtt konzultálniuk szakképzett fogorvossal. Egyéb szájüregi tünetek, például legyengült fogak vagy tartós ínyvérzés esetén a termék használata előtt konzultáljon fogorvosával. Az érzékeny és törékeny fogakkal rendelkezőknek a termék használata előtt konzultálniuk kell fogorvosukkal.

A termék kezdeti használata során egyes felhasználóknál viszketés, bizsergés vagy fogínyvérzés jelentkezhetsz, ne aggódjon, ez általában két hét után elmúlik; ha ez tovább tart, forduljon orvosához.

Ez a termék egy személyi tisztítószert. Kérjük, ne használja több embernél. Ne tegye ki a terméket napfénynek. Próbálja meg nem hosszú időre párás környezetbe helyezni. Szellőztetett környezetben, 7-40 fokos hőmérsékleten kell tárolni.

Vízálló IPX-7 szintig, nem tartalmaz hatékony szigetelést a forró víz és a gőz ellen, kérjük, ne használja kádban vagy zuhanyzóban.

Ha a használat után bármilyen kellemetlenséget vagy fájdalmat tapasztal, azonnal hagyja abba a készülék használatát, és forduljon orvoshoz. Ha valamilyen egészségügyi problémája van, konzultáljon orvosával, mielőtt használná ezt az elektromos fogkefét. Ez a termék nem alkalmas 3 év alatti gyermekek, valamint szellemi fogyatékkal élő és cselekvőképtelen személyek számára.

Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a töltőnyílást, hogy megakadályozza a por és a szennyeződés felhalmozódását, amely csökkenti a szigetelő hatást, és nemkívánatos következményekhez, például túlmelegedéshez vezet.

Az eldobott fogantyúkat és tartozékokat a háztartási kisgépek újrahasznosítására és ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Ez a termék kizárólag szájon át történő tisztításra szolgál. Ne használja más célra. Ha bármilyen kellemetlenséget vagy fájdalmat tapasztal, hagyja abba a termék használatát, és forduljon fogorvosához.

Ne módosítsa vagy javítsa ezt a terméket.

A biztonság érdekében a csökkent fizikai képességű, szellemi vagy érzékszervi károsodással, valamint a megfelelő tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyeknek ezt a terméket egy másik személy felügyelete vagy irányítása mellett kell használniuk. Ne engedje, hogy felügyelet nélküli gyermekek mossanak fogat vagy tartsák karban a terméket. Tartsa a terméket 8 év alatti gyermekek számára elérhetetlen helyen. Tartsa szemmel a gyermekeket, és akadályozza meg, hogy a termékkel játsszanak.

A terméket szellőztetett és száraz környezetben helyezze el, kerülje a közvetlen napfényt, a tüzet és más hő kibocsátó tárgyakat.

Ha bármilyen kérdése van a pacemakerrel vagy más beültetett eszközökkel kapcsolatban, a termék használata előtt forduljon fogorvosához vagy a beültetett eszköz gyártójához.

**Környezetvédelem:**

A termékben található újratölthető lítium akkumulátor környezetszennyező anyagokat tartalmazhat. Mielőtt kidobja ezt a terméket, vagy elviszi a kormány által kijelölt újrahasznosító állomásra, mindenképpen távolítsa el az akkumulátort, és küldje el a kijelölt újrahasznosító állomásra. Ha nem tudja eltávolítani az akkumulátort, küldje vissza a terméket az értékesítés utáni központba.

**Forgalmazó**

Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Prága 9  
Cseh Köztársaság  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)