


RENPHO

Smart Health Simplified

**Uživatelská
příručka**

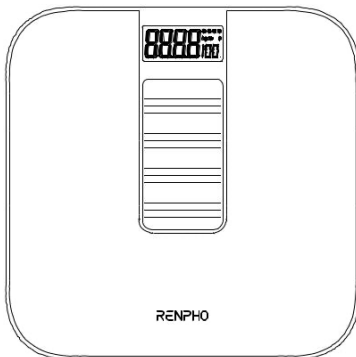

Model: R-A012 / R-A020

Solární váha



Společnost RENPHO se věnuje ochraně životního prostředí snižováním spotřeby papíru. Naskenujte QR kód nebo zadejte níže uvedenou URL adresu a zobrazte nebo si stáhněte plnou verzi elektronické uživatelské příručky:

<https://renpho.com/pages/solar-powered-smart-scale>

Důležité bezpečnostní pokyny

PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

1. Váha je určena pouze pro domácí použití, nikoli pro lékařské ani komerční účely.
2. Těhotné osoby, osoby s osteoporózou, kardiostimulátorem, umělými klouby, přenosným EKG nebo jinými kovovými implantáty by měly váhu používat pouze k vážení a při vstupu na váhu by si měly obuté boty, aby se zabránilo úniku elektrického proudu.
3. Veškeré údaje o složení těla jsou pouze orientační a neměly by být používány jako náhrada za radu od kvalifikovaného zdravotnického pracovníka.
4. Toto zařízení je váha napájena solární energií. Nabíjejte ji přímým slunečním světlem nebo jinými světelnými zdroji. Nepodporuje nabíjení přes USB.
5. Před prvním použitím zapněte hlavní vypínač. Pokud váhu delší dobu nepoužíváte, vypněte ji.
6. Chcete-li váhu aktivovat, stoupněte si na ni bez bot.
7. Nepoužívejte váhu v prostředí s náhlými změnami teploty.
8. Váhu používejte na suchém, rovném, pevném a rovnoměrném povrchu.
9. Nestůjte po stranách váhy ani na ni neskákejte, abyste předešli zranění.
10. Nepřetěžujte váhu (max. 180 kg/400 lb).
11. Umístěte/používejte váhu na dobře osvětleném místě (alespoň 2 "●•••" se na displeji zobrazí.), aby bylo zajištěno dostatečné osvětlení pro delší používání.
12. Umístěte váhu do oblasti, kde je 4 "●•••" se na displeji zobrazí pro rychlejší nabíjení, když je baterie téměř vybitá.
13. Zabraňte stříkání vody na solární panel váhy.
14. Neponořujte váhu do vody ani nepoužívejte chemické čisticí prostředky. Váhu čistěte mírně navlhčeným hadříkem.
15. Nepokoušejte se váhu z žádného důvodu rozebírat, jinak může dojít ke ztrátě záruky.
16. Baterii nezahřívejte ani nedemontujte.
17. Lithiová baterie s poškozeným obalem by neměla být vystavena vodě.

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

O produktu

1. Technické specifikace

Název produktu: Chytrá váha

Model: R-A012 / R-A020

Provozní napětí: 3,7 V

Provozní proud: $\leq 13,5$ mA

Kapacita vestavěné baterie: 500 mAh

Jednotka: kg/lb (Přepnout přes aplikaci)

Přesnost: < 50 kg: $\pm 0,3$ kg;

50–100 kg: $\pm 0,4$ kg;

> 100 kg: $\pm 0,5$ kg;

< 110 liber: $\pm 0,66$ libry

56,7–100,1 kg: $\pm 0,88$ kg

> 220 liber: $\pm 1,1$ libry


Dělení: 0,05 kg / 0,2 lb

Nosnost: 0,2–180 kg / 0,4–400 lb

Velikost produktu: 280 x 280 x 23 mm / 11 x 11 x 0,9 palce

Hmotnost produktu: 1,3 kg / 2,9 lb

2. Displej

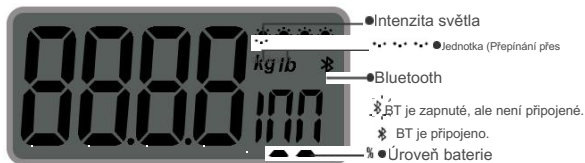

a. Aby váha měla dostatek světla pro delší používání,

Umístěte/používejte jej na dobře osvětleném místě. (Nejméně 2 "●●●●" b.

Pro rychlejší akumulaci energie umístěte váhu do oblasti s přímým

slunečním světlem (4 "●●●●" se na displeji zobrazí.), když je baterie téměř vybitá.



3. Ikony

 Přetížený (Max. 180 kg/400 liber)	 Slabá baterie (Umístěte váhu do slunce v pravý čas.)	 Měření tělesného tuku	 Kalibrace
---	---	--	--

Používání produktu

1. Před použitím

a. Váhu umístěte na suchý, rovný, pevný a pevný povrch. Vyhněte se mokré, kluzké, kobercové nebo nerovné podlaze.

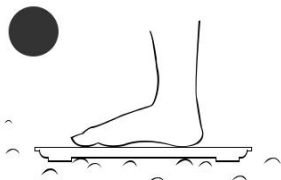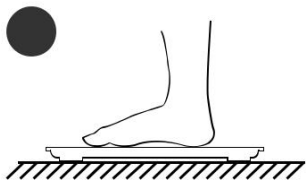

b. Zapněte vypínač na zadní straně váhy.


c. Kalibrace: Jemně stoupněte na váhu a poté z ní sestupte. Na displeji váhy se zobrazí „CAL“ a poté „0,00“, což znamená, že kalibrace je dokončena.

d. Začněte měřit.

2. Měření

a. Postavte se na váhu suchýma a bosýma nohama a počkejte 3–5 sekund. b. Jakmile číslo zobrazené na displeji váhy dvakrát blikne, měření je dokončeno.

* Pokud je připojení úspěšné, lze měření zobrazit prostřednictvím aplikace Renpho Health.

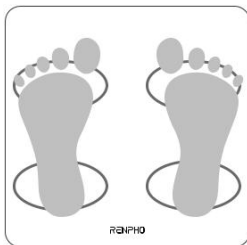

Tipy:

1. Pro zajištění přesnosti se prosím snažte měřit ve stejnou dobu a za stejných podmínek.
2. Váha se po 10 sekundách nečinnosti přepne do pohotovostního režimu. Pro aktivaci váhy na ni jemně stoupněte.

Průvodci aplikacemi

1. Stáhněte si aplikaci Renpho Health

Naskenujte níže uvedený QR kód nebo vyhledejte „Renpho Health“ v App Storu nebo Google Play a stáhněte si aplikaci.

Systémové požadavky: iOS 12.0 nebo novější, Android 7.0 nebo novější.



Renpho Health



Poznámka: Vzhledem k neustálým aktualizacím a vylepšením se aplikace „Renpho Health“ může mírně lišit.

2. Přihlášení/Registrace

a. Přihlaste se přímo pomocí stávajícího účtu aplikace Renpho.

b. Pokud nemáte účet v aplikaci Renpho, klepněte na „Registrovat se“.

Zaregistrujte si nový účet pomocí své e-mailové adresy a vyplňte informace o svém profilu, které jsou nutné pouze pro výpočet rozměrů.

Poznámka: Pokud si nepřijete registrovat účet, můžete se také přihlásit v režimu hosta. Vaše rozměry se však neuloží, pokud se přihlásíte na jiném zařízení.

3. Přidat zařízení

* Před přidáním zařízení povolte na svém smartphonu Bluetooth.
(Systém Android vyžaduje polohu.)


Metoda 1:

- Postavte se na váhu a zobrazí se okno.
- Klepnutím na „Párovat“ spárujete chytrý telefon s váhou.



Metoda 2:

- Klepněte na „Přidat zařízení“ v pravém horním rohu stránky „Zdraví“ pro ruční připojení.
- Klepněte na „Váha tělesného tuku“.
- Postavte se na váhu a postupujte podle pokynů v aplikaci, dokud se na obrazovce nezobrazí okno.
- Klepněte na „+“ pro připojení. (Po úspěšném spárování se ikona Bluetooth na displeji váhy rozsvítí trvale.)

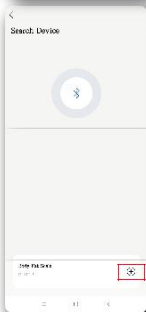

4. Přepněte jednotky

Chcete-li přepnout jednotky, klepněte na „Nastavení“ a poté na „Jednotky“ a vyberte jednotku podle svých potřeb.



Často kladené otázky

1. Jak mohu váhu zapnout?

Zapněte vypínač na zadní straně váhy a stoupněte si na ni bez bot.

2. Musím vyměnit baterii?

Ne, nemusíte. Váha je napájena solární energií a dalšími světelnými zdroji.

3. Jak mohu váhu nabít?

Umístěte váhu tam, kde je viditelné světlo. Čím silnější je intenzita světla, tím rychlejší je nabíjení.

4. Jak zjistím aktuální úroveň nabití baterie?

Zkontrolujte procento nabití baterie na displeji váhy. 100 % znamená, že váha je plně nabitá.

5. Jak zjistím aktuální intenzitu světla?

Zkontrolujte počet „●●●●“ na displeji váhy. Čím více „●●●●“, čím jich je, tím silnější je intenzita světla.

6. Proč váha přestala fungovat?

Váha se možná vybila. Umístěte váhu na dobře osvětlené místo, kde se nabije.

Záruční podmínky

Na váš produkt RENPHO se vztahuje jednoletá omezená záruka výrobce od data dodání. Záruční podmínky naleznete na adrese:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Poznámka: Registrace produktu není pro uplatnění záruky nutná. Pokud se rozhodnete produkt nezaregistrovat, záruka na produkt tím neztratí platnost.

Služby zákazníkům

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek nás neváhejte kontaktovat. Tým zákaznických služeb RENPHO zaručuje rychlou reakci a bezproblémové řešení jakéhokoli problému, který můžete mít, v rámci pracovní doby.



Telf: +34 910 254 378



E-mail: ventas@360mobile.es

*V případě vadných produktů nebo vrácení zboží nás prosím kontaktujte s číslem vaší objednávky v rámci stanovené záruční doby. **NEVYHAZUJTE** žádné součásti produktu, protože mohou být potřebné k jeho kontrole/opravě.

Oznámení:

Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován s ostatním domovním odpadem v celé EU. Aby se předešlo možnému poškození



pro životní prostředí nebo lidské zdraví z nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálu zdroje. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte prosím systémy pro sběr a vrácení zboží nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce může výrobek odvézt k ekologicky bezpečné recyklaci.

Soulad s předpisy FCC

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Varování: změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Shoda s předpisy pro vystavení rádiovým vlnám

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí.

Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován ve spojení s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.

Soulad s předpisy ISED

Toto zařízení obsahuje vysílače osvobozené od licence, které splňují požadavky RSS kanadského ministerstva pro inovace, vědu a ekonomický rozvoj (Innovations, Science and Economic Development Canada). Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.

(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada platí pro aux appareils radiové výjimky z licence. Vykořisťování je autorisée aux deux suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, my si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Toto zařízení splňuje limity radiální expozice stanovené normou IC RSS-102 pro nekontrolované prostředí.

Cet équipement est conforme aux aux d'exposition aux záření IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé.

RENPHO

Smart Health Simplified

Dovozce do Spojeného království: EEON(UK)LIMITED

Kemp House, 160 City Road, Londýn, EC1V 2NX, Spojené království

Dovozce do EU: Renpho GmbH

Lehmweg 17, 20251 Hamburg Hoheluft-Ost, Deutschland,

Německo Tel: +49 40 23969285 (POUZE DE)

Výrobce: Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. Qianhai

Complex A201, Qianwan Road 1, Qianhai Shenzhen-Hong Kong

Cooperation Zone, Shenzhen, 518000 PRChina

UK REP Richers & Vision Ltd.

Lion Court, Farnham Road, Bordon, Anglie, GU35 0NF.

EU REP C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH Zum

Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Německo E-

mail: info@ce-connection.de

Vyrobeno v Číně

NA1