

RENPHO

Uživatelská
příručka

Masážní přístroj na nohy s teplem



Model: RP-ALM079H

Děkujeme vám za zakoupení masážního přístroje na nohy RENPHO s ohřevem. Tento masážní přístroj je určen k masáži celých nohou včetně chodidel, lýtek a stehen. Abyste zajistili bezpečnost a předešli náhodnému poškození nebo zranění, pečlivě si přečtěte tento návod a používejte výrobek pouze k určenému účelu. Nedodržení pokynů může způsobit vážná zranění, smrt a/nebo závažné škody na majetku.

Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

1. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyly poskytnuty pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
2. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
3. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem by neměly provádět děti.
4. Přístroj je určen pouze pro domácí použití a není určen pro lékařské účely. Neměl by být používán k léčbě nebo zmírňování onemocnění nebo abnormálního fyzického stavu.

NEBEZPEČÍ - Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem a požáru:

1. S tímto spotřebičem nikdy nepoužívejte špendlíky ani jiné kovové spojovací prvky.
2. Ujistěte se, že elektrické napětí a frekvence obvodu odpovídají údajům uvedeným na adaptéru.
3. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je v provozu.
4. Po každém použití vždy odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky.
5. Nepřipojujte ani neodpojujte napájecí adaptér ani vzduchovou hadici mokřima rukama.
6. Udržujte kabel a spotřebič mimo dosah horkých povrchů.
7. Spotřebič má funkci ohřevu. Osoby necitlivé/citlivé na teplo by ho měly vypnout. Teplotu během používání.

VAROVÁNÍ - Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob, dodržujte prosím níže uvedené pokyny:

1. Pokud patříte do některé z následujících skupin uživatelů, porad'te se před použitím s lékařem:
 - Těhotné nebo rodící ženy
 - Děti
 - Senioři (nad 65 let)
 - Osoby s kožními infekcemi, citlivostí, zarudnutím, ranami a/nebo popáleninami na kůži
 - Osoby používající kardiostimulátor nebo jiné implantabilní zdravotnické zařízení
 - Osoby se srdečními chorobami, zhoubnými nádory nebo jinými závažnými zdravotními problémy
 - Osoby podstupující lékařské ošetření nebo pocitující nepohodlí během masáží
 - Osoby trpící osteoporózou, cukrovkou nebo trombózou
 - Osoby s vysokým nebo abnormálním krevním tlakem
 - Osoby trpící smyslovým postižením, které snižuje pocit bolesti nebo tepla (např. metabolická porucha)
 - Osoby trpící horečkou nad 100,4 °F
2. Pokud se po použití necítíte dobře nebo se necítíte dobře, přestaňte přípravek používat a porad'te se s lékařem.
3. **NEPOUŽÍVEJTE** náhradní díly, které nejsou schváleny společností RENPHO.

4. Žádný profesionální opravář by neměl spotřebič rozebírat ani vyměňovat bezpovolení výrobce.
5. NEPOUŽÍVEJTE spotřebič, pokud jsou obalové povrchy nebo napájecí kabel poškozené.
6. NEPOUŽÍVEJTE ani NESKLADUJTE spotřebič na místě s vysokou vlhkostí, jako je koupelna nebo místa s vysokou teplotou.
7. Nepřenašejte spotřebič za napájecí kabel ani za ruční ovladač.
8. NEPOUŽÍVEJTE během spánku, obsluhy strojů nebo po konzumaci alkoholu.
9. Během používání spotřebiče NESTŮJTE ani NECHODTE.
10. NEDOSTÁVEJTE vodě ruční ovladač, obaly ani napájecí adaptér, protože by mohlo dojít k jeho poškození.
může dojít k poruše nebo úrazu elektrickým proudem.
11. Nepoškrábejte, nadměrně neohýbejte, netahejte ani nekrutěte vodič napájecího adaptéru.
12. NEPOKLÁDEJTE těžké předměty na šterbinu ani do ní nevkládejte žádné cizí předměty (mohlo by to způsobit požár a úraz elektrickým proudem).
13. NEPOUŽÍVEJTE ostré nástroje k poškrábání nebo propíchnutí obalů, mohlo by dojít k úniku vzduchu ze spotřebiče.
14. NEPOUŽÍVEJTE zábaly přímo na oteklé, zanícené oblasti, citlivou pokožku nebo kožní vyrážky.
15. NEPOUŽÍVEJTE spotřebič déle než 20 minut v kuse. Dlouhodobé používání by mohlo vést k nadměrnému zahřívání spotřebiče a kratší životnosti.
16. NEPOUŽÍVEJTE pod dekou nebo polštářem. Může dojít k nadměrnému zahřátí a způsobit požár. úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.
17. NEPOUŽÍVEJTE spotřebič na domácích mazlíčcích ani zvířatech.
18. Zahřívání povrchy používejte opatrně. Může způsobit vážné popáleniny. Bezobslužné používání tepla dětmi nebo osobami bez dozoru může být nebezpečné.
19. Teploty dostatečně vysoké na to, aby způsobily popáleniny, se mohou vyskytnout bez ohledu na regulaci nastavení. Nepoužívejte u kojenců, invalidů ani u spící či bezvědomí osoby. Nepoužívejte na necitlivé pokožce ani u osob se špatným krevním oběhem. Pravidelně kontrolujte pokožku, která se dotýká zahřáté části spotřebiče, abyste snížili riziko vzniku puchýřů.
20. Používejte tento spotřebič pouze k účelu, ke kterému je určen, jak je popsáno v tomto návodu. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
21. Nikdy nevhazujte ani nevkládejte žádné předměty do žádného otvoru.
22. Spotřebič je určen k používání pouze s napájecím zdrojem, který je součástí dodávky.

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

O masážním přístroji na nohy RENPHO s teplem

1. Obsah balení

- 1 x bandáž na levé stehno
- 1 x bandáž na pravé stehno
- 1 x Obal na levé lýtko (G)
- 1 x Obal na pravé lýtko (G)
- 1 x Ruční ovladač
- 1 x Napájecí adaptér
- 1 x

Uživatelská
příručka
1 x úložný vak


2. Představení produktu



Stehenní zábaly



Napájecí adaptér

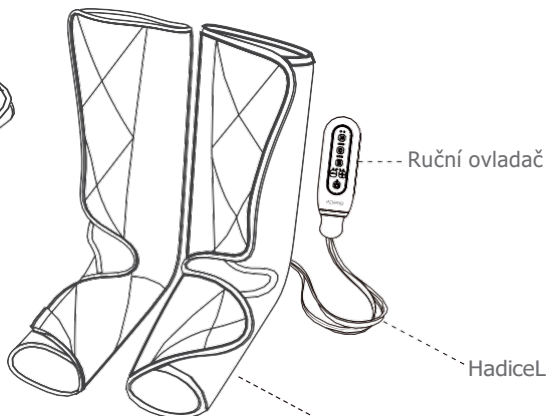

ýtkové zábaly na
chodidla G

3. Specifikace

Název produktu: Masážní přístroj na nohy s teplem
Model: RP-ALM079H

Produkt: Vstup: 12V $\approx$ 2 A

Jmenovitý výkon: 24 W

Adaptér: Vstup: 100-240 V AC 50/60 Hz

Výstup: 12 V $\approx$ 2A

Časovač automatického vypnutí: 20 minut

Používání masážního přístroje na nohy s teplem

1. Před použitím

1.1 Při nošení bandáží se ujistěte, že máte odpovídající bandáž na správné noze: levé a pravé.



„L“ pro levou nohu



„R“ pro pravou nohu

1.2 Najděte značku na stehenních bandážích, uvidíte, která strana je nahoru.



1.3 Pokud potřebujete použít stehenní bandáž, ujistěte se, že jsou stehenní a lýtková bandáž spojeny vzduchovou hadicí. Vzduchová hadice by měla být bezpečně připojena. Viz obrázek níže.

1.4 Ujistěte se, že je hadice bezpečně připevněna, a to tak, že ji namíříte na zacvakávací spoj k ovladači, jak je znázorněno níže.

1.5 Pokud máte pocit, že masáž je příliš silná, nebo ji dáváte přednost méně intenzivní, řiďte se prosím těmito doporučeními:

- Zvolte nejnižší intenzitu
- Povolte suchý zip příslušné části.
- Doporučuje se ponechat dostatek prostoru pro 4 prsty mezi masážním přístrojem a lýtkem. Viz obrázek níže.



1.3




1.4



1,5

2. Návod k obsluze

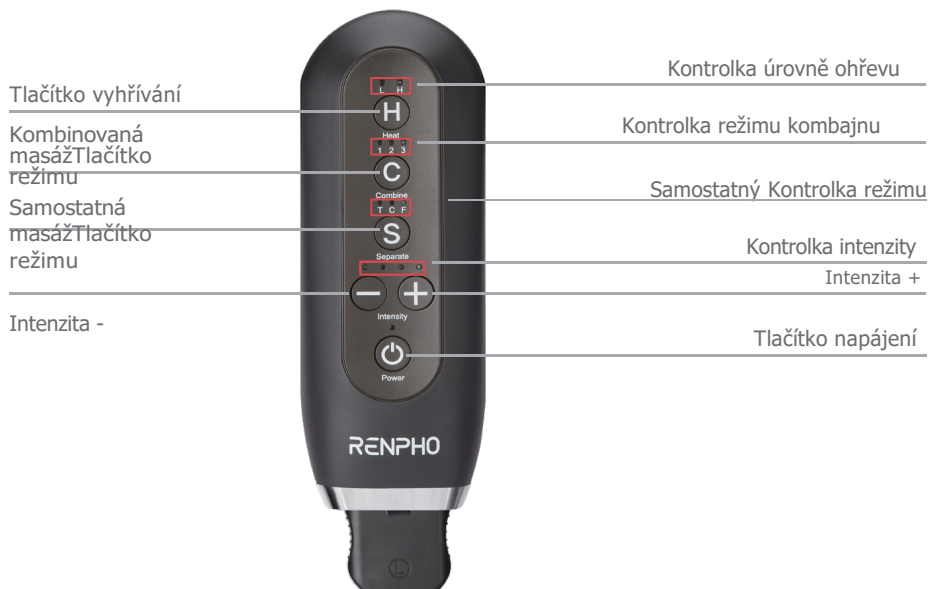

1. „“, Stisknutím zapnete/vypnete masážní přístroj. Výchozí režim je kombinovaný režim 1 s intenzitou 2.“a vysoký stupeň zahřátí (svítí trvale zelená kontrolka).
2. „“ „Stisknutím tohoto tlačítka zvolíte nízký ohřev (L), vysoký ohřev (H) nebo žádný ohřev. Oblast ohřevu: lýtka a chodidla.“
3. „“, Stisknutím tohoto tlačítka vyberete následující režimy: “
C1: Masírujete si chodidla, lýtka a stehna.
C2: Masírujete chodidla a lýtka k sobě. Vzduchovou hadici stehenních bandáží lze odpojit v tento režim.
C3: Cyklicky masírujete chodidla, lýtka a stehna.Po opětovném stisknutí tohoto tlačítka se vypne.
4. „“, Stiskněte pro samostatnou masáž stehen, lýtek a chodidel.“ T: Masáž pouze stehen
C: Masáž pouze lýtekF:
Masáž pouze chodidel
Po opětovném stisknutí tohoto tlačítka se vypne.
5. „“, „Stisknutím zvýšíte intenzitu proudění vzduchu.“
K dispozici jsou 4 úrovně intenzity. Tlačítko intenzity nebude fungovat, pokud vypnete

kombinovaný nebo oddělený režim.

Poznámka:

- 1) Masážní přístroj se automaticky vypne každých 20 minut. Stiskněte tlačítko napájení znovu pro...pokračujte v používání masážního přístroje.
- 2) Masážní přístroj je naprogramován s funkcí paměti a automaticky se spustíposlední nastavení režimu, teploty a intenzity při zapnutí. Po přepnutí režimu se úroveň teploty a intenzity nezmění. Funkce paměti nebude fungovat, pokud vypnete napájení výrobku.
- 3) Stehenní bandáže lze oddělit. Nevybírejte režim Kombinace 1, režim 3 ani režim T.oddělené, když jsou stehenní bandáže odpojeny.
- 4) Pokud současně vypnete ohřev a režim a po dobu 10 sekund nebudete používat ovladač, masážní přístroj se přepne do pohotovostního režimu a zelený indikátor napájení bude blikat.

Bezpečnost G Údržba

1. Metoda čištění



- Neprat v pračce. Neponořujte do žádné tekutiny k čištění. Nečistěte abrazivními čisticími prostředky, kartáči, benzínem, petrolejem, čističem skla.leštidlo nebo ředidlo na barvy. Doporučuje se otřít masážní přístroj měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.

2. Způsob balení

Při balení se vyvarujte přehýbání připojovací hadice, jinak by to mohlo způsobitselhání inflace.

Odstraňování problémů

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Produkt nefunguje	Napájení není připojeno nebo je zástrčka uvolněná. Použití adaptéru s jinou specifikací (kontrolka napájení nefunguje)	Správně zapojte napájecí kabel Použijte dodaný adaptérpouze v balení
	Vypínač není zapnutý neboČasovač automatického vypnutí jej vypne (indikátor napájení bliká zeleně)	Zapněte vypínač
Cítím se příliš mocně, nepříjemně, nebo napjaté při masáži	Šátky jsou příliš těsné	1. Zvolte nejnižší intenzitu 2. Povolte suché zipy příslušné části 3. Stisknutím tlačítka napájení vypnete 4. Odpojte vzduchovou hadiciz ovladače se airbag rychle vyfoukne
	Intenzita je nastavena příliš vysoko	
Najednou žádné teplo	Ochrana proti přehřátí díky dlouhodobému používání	Restartujte masážní přístrojpoté, co vychladne
Řadičzahřeje se	Produkt byl pravděpodobně používán příliš dlouho	Doporučuje se používat totomasážní přístroj po dobu pouze 20–30 minut na sezení, abyste zabránili jeho PŘEKONÁNÍ. Po vypnutí nechte masážní přístroj vychladnout, než jej znovu použijete.
Intenzita masáže každé nohy se při současném použití liší.	Při nošení masážního přístroje se mezera, kteroupři utahování suchých zipů se může míra u každé nohy lišit	Zkuste nechat stejnou mezerupři utahování masážního přístroje.
Dochází k úniku vzduchu	Vzduchové hadice nejsousprávně nainstalováno	Opatrně znovu nainstalujte vzduchovou hadici a ujistěte se, žehadice je bezpečně připojena.

Pokud tato řešení nepomohou vyřešit váš problém nebo narazíte na jiné potíže,
neváhejte nás kontaktovat na adrese: support-eu@renpho.com

Záruční podmínky

Na váš nákup produktu RENPHO se vztahuje jednoletá omezená záruka výrobce od data dodání.

Záruční podmínky naleznete na adrese: <https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Poznámka: Registrace produktu není pro záruku vyžadována. Pokud se rozhodnete produkt nezaregistrovat, záruka na produkt se tím nesníží.

Služby zákazníkům

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek nás neváhejte kontaktovat. Tým zákaznických služeb RENPHO zaručuje rychlou reakci a bezproblémové řešení jakéhokoli problému, který můžete mít, v rámci pracovní doby.

 **Tel.:** +44(0)7434-666088 (POUZE SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)

Pondělí–pátek 9:00–17:00 (GMT)

 **E-mail:** support-eu@renpho.com (UKGEU)

*V případě vadných produktů nebo vrácení zboží nás prosím kontaktujte s číslem vaší objednávky doložená záruční doba. NEVYHAZUJTE žádné součásti produktu, protože by mohly být potřebné pro kontrolu/opravu.

1. Význam symbolu přeškrtnuté popelnice na kolečkách



Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že máte ze zákona povinnost tyto spotřebiče likvidovat odděleně od netříděného komunálního odpadu, tj. staré spotřebiče je nutné likvidovat odděleně z domovního odpadu. Baterie nebo dobíjecí baterie, které nejsou trvale nainstalovány, musí být předem vyjmuty a zlikvidovány odděleně.

2. Možnosti vrácení starých spotřebičů

Majitelé elektroodpadu jej mohou vrátit nebo vyzvednout v rámci stanovených možností k dispozici orgánům veřejného nakládání s odpady k zajištění řádné likvidace.



Společnost Shēnzhèn Ruìyì Bùsīnèss Tèchnòlògy Cò., Lìd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/30/EU, směrnicí 2014/35/EU, směrnicí 2011/65/EU, předpisy o bezpečnosti elektrických zařízení z roku 2016, předpisy o elektromagnetické kompatibilitě z roku 2016, předpisy o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních z roku 2012 a další relevantní ustanovení. Uplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

RENPHO