

RENPHO

Používateľská
príručka

Masáž nôh teplom



Model: RP-ALM079H

Ďakujeme, že ste si zakúpili masážny prístroj na nohy RENPHO s teplom. Tento masážny prístroj je určený na masáž celej nohy vrátane chodidiel, lýtok a stehien. Pre zaistenie bezpečnosti a predchádzanie náhodnému poškodeniu alebo zraneniu si pozorne prečítajte tento návod a používajte výrobok iba podľa pokynov. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť vážne zranenia, smrť a/alebo vážne škody na majetku.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pri používaní spotrebiča by ste mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.

1. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúsenosti a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo im neboli poskytnuté pokyny týkajúce sa používania spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
2. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
3. Čistenie a údržbu zo strany používateľa nesmú vykonávať deti.
4. Zariadenie je určené len na domáce použitie a nie je určené na lekárske účely. Nemalo by sa používať na liečbu alebo zmiernenie chorôb alebo abnormálnych fyzických stavov.

NEBEZPEČENSTVO – Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom a požiaru:

1. S týmto spotrebičom nikdy nepoužívajte špendlíky ani iné kovové upevňovacie prvky.
2. Uistite sa, že elektrické napätie a frekvencia obvodu zodpovedajú údajom uvedeným na adaptéri.
3. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je v prevádzke.
4. Po každom použití vždy odpojte napájací adaptér z elektrickej zásuvky.
5. Nepripájajte ani neodpájajte napájací adaptér ani vzduchovú hadicu mokrymi rukami.
6. Uchovávajte kábel a spotrebič mimo dosahu horúcich povrchov.
7. Spotrebič má funkciu ohrevu. Osoby necitlivé/citlivé na teplo by ho mali vypnúť/teplotu počas používania.

UPOZORNENIE - Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb, dodržiavajte pokyny nižšie:

1. Ak patríte do niektorej z nasledujúcich skupín užívateľov, pred použitím sa poradte s lekárom:
 - Tehotné alebo rodilé ženy
 - Deti
 - Starší ľudia (nad 65 rokov)
 - Osoby s kožnými infekciami, citlivosťou, začervenaním, ranami a/alebo popáleninami na pokožke
 - Osoby používajúce kardiostimulátor alebo inú implantovateľnú zdravotnícku pomôcku
 - Osoby so srdcovými chorobami, zhubnými nádormi alebo inými vážnymi zdravotnými problémami
 - Osoby, ktoré podstupujú lekársku starostlivosť alebo pociťujú nepohodlie počas masáží
 - Osoby trpiace osteoporózou, cukrovkou alebo trombózou
 - Osoby s vysokým alebo abnormálnym krvným tlakom
 - Osoby trpiace senzorickým poškodením, ktoré znižuje pocit bolesti alebo tepla (napr. metabolická porucha)
 - Osoby trpiace horúčkou nad 100,4 °F
2. Ak sa po použití cítite abnormálne alebo zle, prestaňte liek používať a poradte sa s lekárom.
3. **NEPOUŽÍVAJTE** náhradné diely, ktoré nie sú schválené spoločnosťou RENPHO.

4. Žiadni odborní opravári by nemali rozoberať ani vymieňať spotrebič bezpovolenie výrobcu.
5. NEPOUŽÍVAJTE spotrebič, ak sú obalové povrchy alebo napájací kábel poškodené.
6. NEPOUŽÍVAJTE ani NESKLADUJTE spotrebič na mieste s vysokou vlhkosťou, ako je kúpeľňa alebo miesta s vysokou teplotou.
7. NEPRENÁŠAJTE spotrebič za napájací kábel ani za ručný ovládač.
8. NEPOUŽÍVAJTE počas spánku, obsluhy strojov alebo po konzumácii alkoholu.
9. Počas používania spotrebiča NESTOJTE ani NECHODTE.
10. Nevystavujte ručný ovládač, obaly ani napájací adaptér vode, pretože by to mohlo spôsobiť k poruche alebo úrazu elektrickým prúdom.
11. Neškriabte, nadmerne neohýbajte, neťahajte ani neskrúcajte kábel napájacieho adaptéra.
12. NEKLADTE ťažké predmety na štrbinu ani do nej nevkladajte žiadne cudzie predmety (môže to spôsobiť požiar a úraz elektrickým prúdom).
13. NEPOUŽÍVAJTE ostré nástroje na poškrabanie alebo prepichnutie obalov, pretože by to mohlo spôsobiť únik vzduchu zo spotrebiča.
14. NEPOUŽÍVAJTE zábal priamo na opuchnuté, zapálené miesta, citlivú pokožku alebo kožné vyrážky.
15. NEPOUŽÍVAJTE spotrebič dlhšie ako 20 minút v kuse. Dlhodobé používanie môže viesť k nadmernému zahrievaniu spotrebiča a skráteniu jeho životnosti.
16. NEPREVÁDZKUJTE pod prikrývkou alebo vankúšom. Môže dôjsť k nadmernému prehriatiu a spôsobiť požiar. úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
17. NEPOUŽÍVAJTE spotrebič na domácich zvieratách.
18. Používajte horúce povrchy opatrne. Môže spôsobiť vážne popáleniny. Bezobslužné používanie tepla deťmi alebo osobami bez dozoru môže byť nebezpečné.
19. Bez ohľadu na kontrolu sa môžu vyskytnúť teploty dostatočne vysoké na to, aby spôsobili popáleniny. nastavenie. Nepoužívajte na dojčatiach, invalidoch ani na spiacich či bezvedomých osobách. Nepoužívajte ho na necitlivej pokožke alebo na osobách so slabým krvným obehom. Pravidelne kontrolujte pokožku, ktorá prichádza do kontaktu s vyhrievanou časťou spotrebiča, aby ste znížili riziko vzniku pľuzgierov.
20. Tento spotrebič používajte iba na určený účel, ako je popísané v tomto návode. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
21. Nikdy nepúšťajte ani nevkladajte žiadne predmety do žiadneho otvoru.
22. Spotrebič sa smie používať iba s napájacím zdrojom, ktorý je súčasťou balenia spotrebiča.

USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY

O masážnom prístroji na nohy RENPHO s teplom

1. Obsah balenia

1 x Ľavý stehenný
zábal 1 x Pravý
stehenný zábal
1 x zábal ľavého lýtko (G)
1 x zábal pravého lýtko
(G) 1 x ručný ovládač
1 x Napájací
adaptér 1 x
Používateľská

průručka

1 x Úložné vrečko


2. Predstavenie produktu



Stehenné zábaly



Napájací adaptér

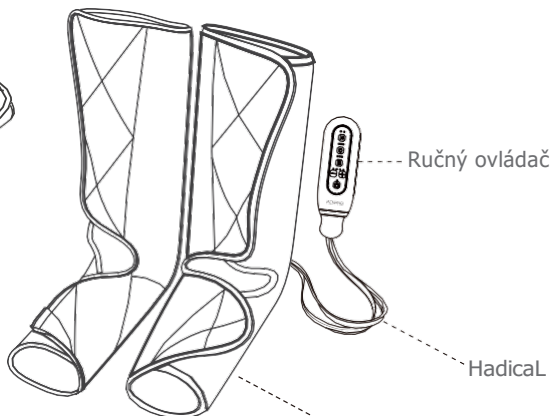

Ruční ovládač

Hadical

čtyřlístkové zábaly G na

chodidla

3. Špecifikácie

Názov produktu: Masážny prístroj na

nohy s teplom Model: RP-ALM079H

Produkt: Vstup: 12V $\rightarrow$ 2 A

Menovitý výkon: 24 W

Adaptér: Vstup: 100-240 V AC 50/60 Hz

Výstup: 12 V $\rightarrow$ 2A

Časovač automatického vypnutia: 20 minút

Používanie masážneho prístroja na nohy s teplom

1. Pred použitím

1.1 Pri nosení bandáží sa uistite, že ich nosíte na príslušnej nohe: ľavej a pravej.



„L“ pre ľavú nohu



„R“ pre pravú nohu

12 Nájdite značku na stehenných bandážach, uvidíte, ktorá strana je hore.



13 Keď potrebujete použiť bandáž na stehná, uistite sa, že bandáž na stehná a lýtko je spojená vzduchovou hadicou. Vzduchová hadica by mala byť bezpečne pripojená. Pozrite si obrázok nižšie.

14 Uistite sa, že hadica je bezpečne pripojená, a to tak, že ju namierite na zacvakávací spoj k ovládaču, ako je znázornené nižšie.

15 Ak máte pocit, že masáž je príliš silná alebo ju uprednostňujete menej intenzívnu, postupujte podľa týchto odporúčaní:

- Vyberte najnižšiu intenzitu
 - Uvoľnite suchý zips príslušnej časti.
 - Odporúča sa ponechať medzi masážnym prístrojom a lýtkom dostatok miesta pre 4 prsty.
- Pozrite si obrázok nižšie.



1,3




1,4



1,5

2. Návod na obsluhu

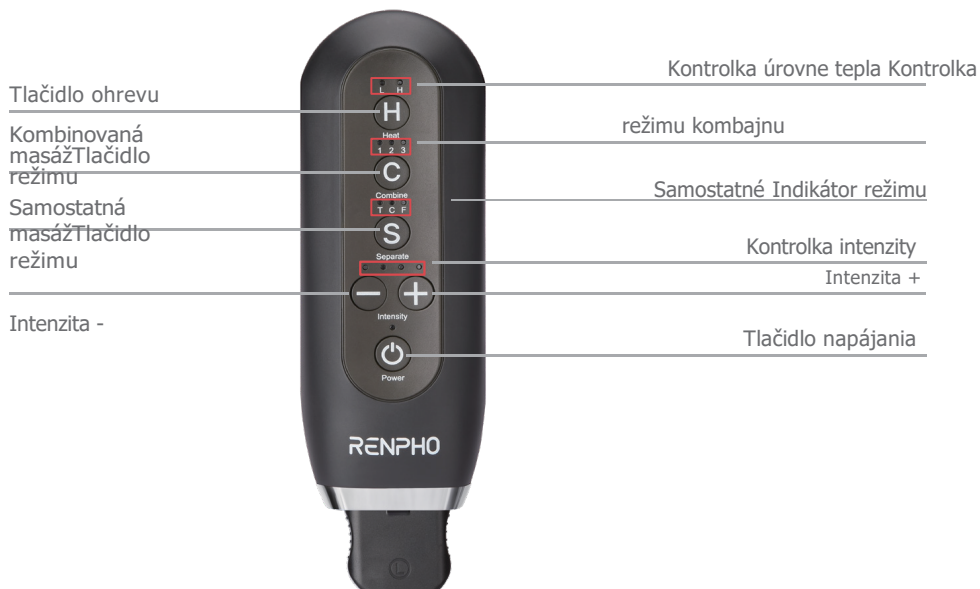

1. **⏻** „Stlačením zapnete/vypnete masážny prístroj. Predvolený režim je kombinovaný režim 1 s intenzitou 2.“a vysoká úroveň tepla (svieti nepretržite zelená kontrolka).
2. **H** „Stlačením tohto tlačidla zvolíte nízky ohrev (L), vysoký ohrev (H) alebo žiadny ohrev. Oblasť ohrevu: lýtko a chodidlá.“
3. **C** „Stlačením tohto tlačidla vyberiete nasledujúce režimy:“
 C1: Masírujte si chodidlá, lýtko a stehná.
 C2: Masírujte si chodidlá a lýtko k sebe. Vzduchovú hadicu stehenných bandáží je možné odpojiť vtento režim.
 C3: Cyklicky masírujte chodidlá, lýtko a stehná.Po opätovnom stlačení tohto tlačidla sa vypne.
4. **S** „Stlačením si môžete samostatne masírovať stehná, lýtko a chodidlá.“T:
 Masírujte iba stehná
 C: Masáž iba lýtok
 F: Masáž iba chodidiel
 Po opätovnom stlačení tohto tlačidla sa vypne.
5. **+** „Stlačením zvýšite úroveň intenzity prúdenia vzduchu.“
 Na výber sú 4 úrovne intenzity. Tlačidlo intenzity nebude fungovať, ak vypnete kombinovaný

alebo samostatný režim.

Poznámka:

- 1) Masážny prístroj sa automaticky vypne každých 20 minút. Opätovným stlačením tlačidla napájania pokračujte v používaní masážneho prístroja.
- 2) Masážny prístroj je naprogramovaný s pamäťovou funkciou a automaticky sa zapne posledné nastavenie režimu, teploty a intenzity pri zapnutí. Po prepnutí režimu sa úroveň teploty a intenzity nezmení. Funkcia pamäte nebude fungovať, ak vypnete napájanie výrobku.
- 3) Stehenné bandáže sa dajú odpojiť. Nevyberajte režim Kombinácia 1, režim 3 alebo režim Tsamostatné, keď sú stehenné bandáže odpojené.
- 4) Ak súčasne vypnete kúrenie a režim a nebudete 10 sekúnd používať ovládač, masážny prístroj prejde do pohotovostného režimu so zeleným blikaním indikátora napájania.

Bezpečnosť G Údržba

1. Metóda čistenia



- Neprať v práčke. Neponárajte do žiadnej tekutiny na čistenie. Nečistite ho abrazívnymi čistiacimi prostriedkami, kefami, benzínom, petrolejom, sklomleštidlom alebo riedidlom na farby. Odporúča sa namiesto toho utrieť masážny prístroj mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.

2. Metóda balenia

Pri balení sa vyhnite skladaniu pripojovacej hadice, inak by to mohlo spôsobiť zlyhanie inflácie.

Riešenie problémov

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Produkt nefunguje	Napájanie nie je pripojené alebo je zástrčka uvoľnená. Používanie adaptéra s inou špecifikáciou (kontrolka napájania nefunguje)	Správne zapojte napájací kábel Použite dodaný adaptérba v balení
	Hlavný vypínač nie je zapnutý alebočasovač automatického vypnutia ho vypne (indikátor napájania blíka nazeleno)	Zapnite vypínač
Cítim sa príliš mocne, nepríjemne, alebo napäté pri masáži	Zábaly sú príliš tesné	1. Vyberte najnižšiu intenzitu 2. Uvoľnite suché zipsy príslušnej časti 3. Stlačením tlačidla napájania vypnite 4. Odpojte vzduchovú hadicuz ovládača sa airbag rýchlo vyfúkne
	Intenzita je nastavená príliš vysoko	
Zrazu žiadne teplo	Ochrana proti prehriatiu vďaka dlhodobému používaniu	Reštartujte masážny prístrojpo vychladnutí
Ovládačzahreje sa	Produkt sa pravdepodobne používa príliš dlho	Odporúča sa použiť totomasážny prístroj používajte iba 20 – 30 minút na jedno sedenie, aby ste predišli jeho PREDPÍNANIU. Po vypnutí nechajte masážny prístroj vychladnúť pred opätovným použitím
Intenzita masáže každej nohy sa pri súčasnom použití líši	Pri nosení masážneho prístroja je medzera, ktorúpri ťahovaní suchých zipsov sa môže miera ťahovania líšiť pre každú nohu	Skúste nechať rovnakú medzerupri ťahovaní masážneho prístroja.
Dochádza k úniku vzduchu	Vzduchové hadice nie súbolo správne nainštalované	Opatrne znova nainštalujte vzduchovú hadicu a uistite sa, žehadica je bezpečne pripojená.

Ak tieto riešenia nepomôžu vyriešiť váš problém alebo ak narazíte na akékoľvek iné problémy, neváhajte nás kontaktovať na adrese: support-eu@renpho.com

Záručné podmienky

Na váš nákup produktu RENPHO sa vzťahuje jednoročná obmedzená záruka výrobcu od dátumu dodania.

Záručné podmienky nájdete na adrese: <https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Poznámka: Registrácia produktu nie je pre záruku potrebná. Ak sa rozhodnete produkt nezaregistrovať, záruka na produkt sa tým neznižuje.

Zákaznícky servis

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy, neváhajte nás kontaktovať. Tím zákazníckej podpory RENPHO zaručuje rýchlu reakciu a bezproblémové riešenia akéhokoľvek problému, ktorý môžete mať v rámci pracovných hodín.

 **Tel.:** +44(0)7434-666088 (IBA VB)

Pondelok - piatok 9:00 - 17:00 (GMT)

 **E-mail:** support-eu@renpho.com (UKGEU)

*V prípade chybných produktov alebo vrátenia tovaru nás prosím kontaktujte s číslom vašej objednávky douvedenú záručnú dobu. NEVYHADZUJTE žiadne časti produktu, pretože môžu byť potrebné na kontrolu/opravu.

1. Význam symbolu prečiarknutého kontajnera na kolieskach



Symbol prečiarknutého kontajnera na kolieskach znamená, že ste zo zákona povinní likvidovať tieto spotrebiče oddelene od netriedeného komunálneho odpadu, t. j. staré spotrebiče sa musia likvidovať oddelene z domového odpadu. Batérie alebo nabíjateľné batérie, ktoré nie sú trvalo nainštalované, sa musia vopred vybrať a zlikvidovať samostatne.

2. Možnosti vrátenia starých spotrebičov

Majitelia elektroodpadu ho môžu vrátiť alebo vyzdvihnúť v rámci stanovených možností k dispozícii verejným orgánom nakladania s odpadom, aby sa zabezpečila správna likvidácia.



Spoločnosť Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/30/EÚ, smernicou 2014/35/EÚ, smernica 2011/65/EÚ, predpisy o bezpečnosti elektrických zariadení z roku 2016, predpisy o elektromagnetickej kompatibilite z roku 2016, predpisy o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach z roku 2012 a ďalšie relevantné ustanovenia. Úplné znenie vyhlásenia o zhode je možné získať na nasledujúcej internetovej adrese: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

RENPHO