

RENPHO

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



MORPHOSCAN BASE

Model: R-MS02

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

1. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyly poskytnuty pokyny k používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
2. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
3. Váha je určena pouze pro domácí použití a není určena pro lékařské ani komerční účely. Neměla by být používána k diagnostice onemocnění, poruch nebo abnormálního fyzického stavu.
4. Děti mladší 8 let nebo těhotné osoby, osoby s osteoporózou, kardiostimulátorem, umělými klouby, přenosným EKG nebo jinými kovovými implantáty by měly váhu používat pouze k vážení a při vstupu na váhu by měly mít obuv, aby se zabránilo úniku elektrického proudu.
5. Veškeré uvedené údaje o složení těla slouží pouze pro informaci a neměly by být používány jako náhrada za radu od kvalifikovaného zdravotnického pracovníka.
6. Nepřetěžujte váhu. (Maximální nosnost: 180 kg)
7. Před každým použitím váhu zkontrolujte, zda není poškozená. Nepoužívejte poškozenou váhu, abyste předešli nepřesnosti nebo zranění.
8. V případě jakékoli poruchy nejprve zkontrolujte nabití baterií. V případě potřeby baterie vyměňte.
9. Pro zajištění přesnosti používejte váhu na tvrdém, rovném a suchém povrchu.
10. Abyste předešli rušení nebo nebezpečí, nepoužívejte váhu v prostředí v blízkosti zařízení se silnými elektromagnetickými poli.
11. Abyste předešli zranění, nestůjte na okrajích váhy, neskákejte na ni ani na ni nešlapejte.
12. Váha je jemný a přesný měřicí přístroj. Zacházejte s ní opatrně, abyste se nerozbili.
13. Váha není vodotěsná. Uchovávejte ji suchou a nikdy ji neponořujte do vody. K čištění povrchu použijte vlhký hadřík nebo čistič skla. Nepoužívejte mýdlo ani chemické čisticí prostředky.
14. Nevystavujte váhu přímému slunečnímu záření ani ji nepoužívejte při vysokých teplotách nebo extrémně vlhkých prostorách. Váhu skladujte na chladném a suchém místě.
15. Nepokoušejte se váhu z žádného důvodu rozebírat, mohlo by dojít k poškození a zrušit platnost záruky.

O baterii



1. Nevystavujte váhu ani baterii nadměrným teplotám.
2. Vyměňte všechny baterie v sadě najednou.
3. Různé typy baterií ani nové a použité baterie se nesmí míchat.
4. Vybité baterie je třeba z váhy vyjmout a bezpečně zlikvidovat.
5. Pokud bude váha delší dobu skladována bez použití, měly by se baterie vyjmout.
6. Nepoužívejte upravené nebo poškozené baterie.
7. Uvědomte si riziko zkratu pólů bateriové váhy nebo baterie kovovými předměty.
8. Tato váha obsahuje nedobíjecí baterie, tyto baterie se nesmí dobíjet.
9. Baterie vždy vkládejte správně podle polarit (+ a -) vyznačené na baterii a stupnici.
10. Baterie nezahřívejte, nezkratujte, nevybíjejte násilím, nezapouzdřujte ani neupravujte. Baterie nedeformujte ani nedemontujte.
11. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.
12. Nenabíjejte baterie.
13. Nesvařujte ani nepájejte přímo na baterie.
14. Nevhazujte baterie do ohně.
15. Nedovolte dětem vyměňovat baterie bez dozoru dospělé osoby.
16. Nepoužité baterie skladujte v originálním obalu mimo dosah kovových předmětů. Pokud jsou již vybalené, nemíchejte je ani je neházejte dohromady.

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

CO JE V KRABÍČCE

Základna MorphoScan x1
4x baterie AAA

O VAŠÍ ZÁKLADNĚ MORPHOSCAN

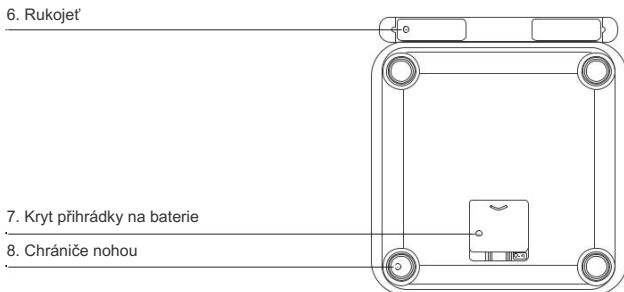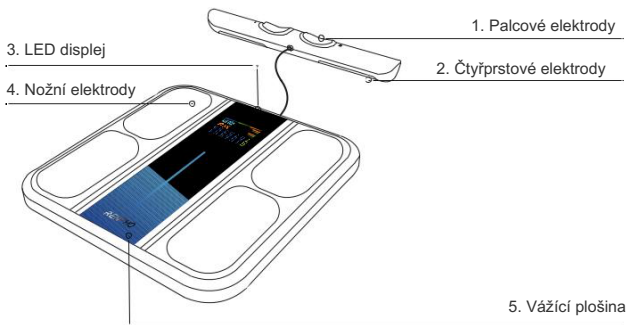

Ikony


Ikona	Popis
	Procento tělesného tuku
	BMI
	Procento kosterního svalstva
	Index viscerálního tuku
	Nízký
	Norma
	Nad
	Bluetooth  Probíhá připojování přes Bluetooth.  Bluetooth je připojen.
	Identifikace uživatele
St Lb Kg	Jednotky Přepnuto přes aplikaci.
	Trend hmotnosti Každý sloupec představuje den a aktuální den je žlutě zobrazen.
Err	Přetížený Maximální nosnost: 180 kg.
Lo	Slabá baterie Vyměňte baterie.



Nesprávné měření
Postavte se na váhu a znovu změřte.

VLOŽENÍ BATERIÍ

Před použitím vložte do váhy dodané baterie. Baterie vždy vkládejte správně s ohledem na polaritu (+ a -) vyznačenou na baterii a váze.

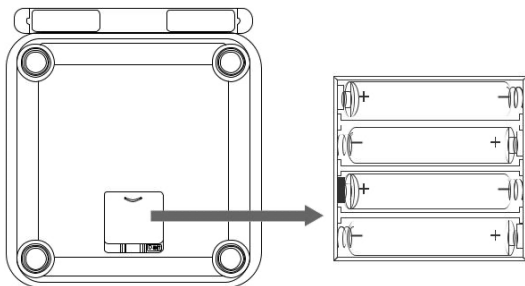

INSTALACE APLIKACE A PÁROVÁNÍ

1. Stáhněte si aplikaci RENPHO Health

Naskenujte níže uvedený QR kód nebo vyhledejte „RENPHO Health“ v App Storu nebo Google Play a stáhněte si aplikaci.

Systémové požadavky: iOS 12.0 nebo novější, Android 7.0 nebo novější



Poznámka: Vzhledem k neustálým aktualizacím a vylepšením se aplikace „RENPHO Health“ může mírně lišit.

2. Přihlášení / Registrace

a. Přihlaste se přímo pomocí stávajícího účtu aplikace RENPHO.

b. Pokud nemáte žádný účet v aplikaci RENPHO, klepněte na „Registrovat se“ pomocí

svou e-mailovou adresu a vyplňte osobní údaje; tento krok je vyžadováno pro přesný výpočet vašich zdravotních parametrů.

Poznámka: Pokud se nechcete registrovat, můžete se také přihlásit v režimu hosta. Vaše naměřená data však nebudou uložena, pokud se přihlásíte na jiném zařízení.

3. Spárujte váhu

Před párováním povolte bezdrátové připojení na smartphonu.

a. Otevřete aplikaci RENPHO Health, umístěte váhu na tvrdý a rovný povrch a stoupněte si na ni bosýma a suchýma nohama.



b. Klepněte na „+“ v pravém horním rohu domovské stránky a vyberte ze seznamu zařízení svou váhu pro měření složení těla.

c. Postupujte podle pokynů v aplikaci a dokončete párování




POUŽITÍ ZÁKLADNY MORPHOSCAN

* Před prvním měřením si v aplikaci RENPHO Health vytvořte správný uživatelský profil. Tím zajistíte, že vaše měření budou přesně zaznamenána a přiřazena k vašemu profilu.


1. Umístěte váhu na rovný, tvrdý povrch a stoupněte si na elektrody váhy bosýma, suchýma nohama. Ujistěte se, že mezi kolena a stehny je dostatek prostoru.

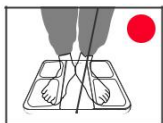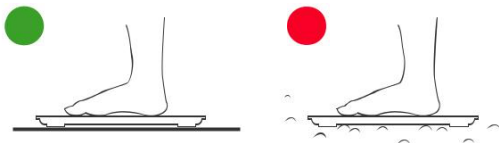

2. Uchopte rukojeť palci na palcových elektrodách a ostatními prsty na čtyřprstových elektrodách.

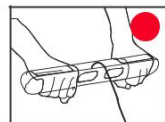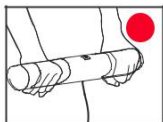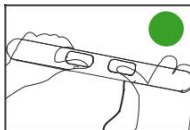

3. Zvedněte a držte rukojeť ve správné výšce s pažemi přirozeně svěřenými, mírně pokrčenými a odtaženými od těla a břicha. Postavte se vzpřímeně, nehýbejte se a počkejte, až se na displeji váhy zobrazí vaše konečné měření.

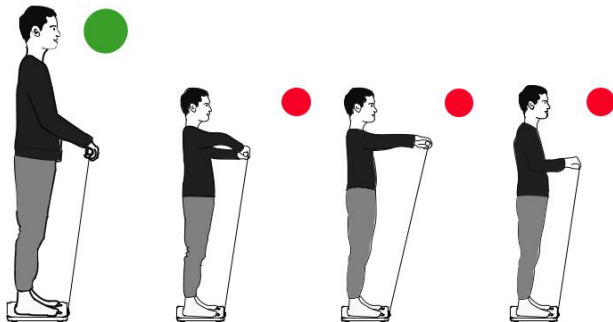

4. Po změření opatrně vraťte rukojeť na váhu. Váha odešle data do aplikace. Otevřete aplikaci pro synchronizaci a zobrazení podrobných měření, sledování pokroku a přístup k dalším funkcím a informacím.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM POTÍŽÍ

1. Údaje o své hmotnosti, tělesném tuku a BMI si můžu vyčíst z displeje váhy, ale moje rodina nebo přátelé to nedokázali. Vaši rodinní příslušníci nebo přátelé musí vyplnit informace o svém profilu ve vaší aplikaci pomocí funkce „přidat člena“ nebo se přihlásit do aplikace RENPHO Health pomocí svého vlastního účtu.

2. Váha nedokáže detekovat tělesný tuk a/nebo jiné údaje.

a. Ujistěte se, že máte nohy suché a bosé.

b. Postavte se na váhu a zůstaňte na ní asi 10 sekund v klidu, aby se proces měření dokončil.

Pokud stále nemáte přístup, zkuste si na nohy nanést trochu hydratačního krému a znovu změřit, nebo požádejte jinou osobu, aby vyzkoušela výše uvedené 2 kroky. Dávejte pozor, abyste na vážící plošině neuklouzli.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název produktu: Váha pro složení těla

Model: R-MS02

Maximální nosnost: 180 kg

Dělení: 0,2 lb / 0,05 kg

Rozměry: 280 x 308 x 35 mm

Baterie: 4 x 1,5V AAA (součástí balení)

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na váš nákup produktu RENPHO se vztahuje jednoletá omezená záruka výrobce od data dodání.

Záruční podmínky naleznete na adrese:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Poznámka: Registrace produktu není pro uplatnění záruky nutná.

Pokud se rozhodnete produkt nezaregistrovat, záruka na produkt tím neztratí platnost.

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM

Neváhejte nás kontaktovat, pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy. Tým zákaznických služeb RENPHO zaručuje rychlou reakci a bezproblémové řešení jakéhokoli problému, který můžete mít v rámci podnikání. hodiny.



TEL: 1(844) 417-0149 (POUZE USA)

Pondělí–pátek 9:00–16:30

1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (POUZE AUSTRÁLIE)

Pondělí–pátek 9:00–18:00 (AEST)

+44(0)7434-666088 (POUZE SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)

Pondělí–pátek 9:00–17:00 (GMT)

+49 40 23969285 (POUZE NĚMECKO)

Pondělí–pátek 9:00–18:00 (SEČ)

23388392 (POUZE HK)



E-mail: support@renpho.com (USA a Kalifornie)

support-au@renpho.com (Austrálie)

support-hk@renpho.com (HK)

support-eu@renpho.com (Spojené království a EU)

*V případě vadných výrobků nebo vrácení zboží nás prosím kontaktujte s číslem vaší objednávky v rámci stanovené záruční doby. NEVYHAZUJTE žádné součásti výrobku, protože by mohly být potřebné k jeho kontrole/opravě.

Soulad s předpisy FCC

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Varování: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření: — Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.

— Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. — Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.

— Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize. Shoda s předpisy ISED

Toto zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) osvobozené od licence, které splňují požadavky RSS osvobozených od licence organizace Innovation, Science and Economic Development Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1: Toto zařízení nemusí způsobovat rušení.

2: Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

L'émetteur/récepteur osvobozeny od licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

Vykořisťování je autorisée aux deux suivantes conditions:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



1. Význam symbolu přeškrtnuté popelnice na kolečkách
Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že máte ze zákona povinnost tyto spotřebiče likvidovat odděleně od netříděného komunálního odpadu, tj. staré spotřebiče musí být likvidovány odděleně od domovního odpadu. Baterie nebo dobíjecí baterie, které nejsou trvale nainstalovány, musí být předem vyjmuty a zlikvidovány odděleně.
2. Možnosti vrácení starých spotřebičů
Vlastníci OEEZ jej mohou vrátit nebo vyzvednout v rámci možností stanovených a dostupných orgány veřejné správy odpadů k zajištění jeho řádné likvidace.
3. Osobní údaje
Všem koncovým uživatelům OEEZ se připomíná, že jsou zodpovědní za smazání osobních údajů z OEEZ určeného k likvidaci.



1. Symbol přeškrtnuté popelnice na bateriích nebo akumulátorech znamená, že se po skončení jejich životnosti nesmí likvidovat v domovním odpadu.
2. Ze zákona jste povinni po použití vrátit staré baterie a akumulátory. Můžete tak učinit zdarma na sběrném místě ve vaší oblasti. Adresy vhodných sběrných míst získáte od svého města nebo místního úřadu.
3. Baterie mohou obsahovat látky škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví. Tříděný sběr a recyklace starých baterií a akumulátorů má zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.
4. Prosíme, pokud možno, zabraňte vzniku odpadu ze starých baterií, např. znečišťujte veřejná prostranství tím, že nebudete nedbale ponechávat baterie ani elektrická a elektronická zařízení obsahující baterie.



Společnost Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, směrnicí 2011/65/EU, nařízením o rádiových zařízeních z roku 2017, nařízením o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních z roku 2012 a dalšími příslušnými ustanoveními. Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Maximální RF výkon: 2,97 dBm
Provozní frekvence: 2402 MHz až 2480 MHz

RENPHO