

Periuță de dinți electrică, Dida DT1056/DT1056A



Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare. Păstrați manualul pentru referințe ulterioare.

1. Parametri

Model	DT1056	DT1056A
Intrare	5V – 1A	
Baterie	1200mAh	
Voltaj	3,7 V	
Performanță	2W	
Rezistență la apă	IPX7	
Alimentare electrică	USB-C	inducție


2. Diagrama produsului

- 1 buton Pornit/Oprit
- 2 Setare forță
- 3 Indicator de setare a forței (progres)
- 4 Mod de curățare
- 5 Mod alb
- 6 Reîmprospătare – Mod de reparare soft
- 7 Indicator baterie

Se recomandă utilizarea celei mai blânde intensități de periaj în primele două săptămâni la introducerea periajului sonic .



Modelul DT1056

- 9 Port de încărcare
- 10 Cablu de încărcare

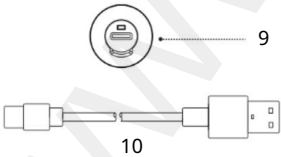

Modelul DT1056A

- 11 Bază de perie
- 12 Bază de încărcare
- 13 contacte de încărcare

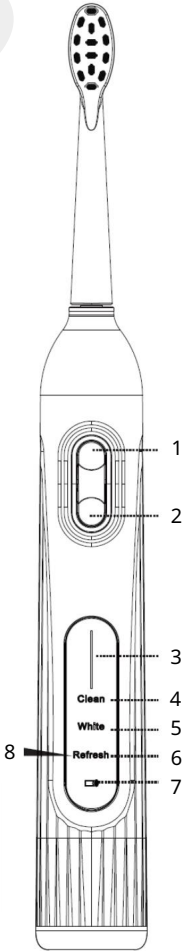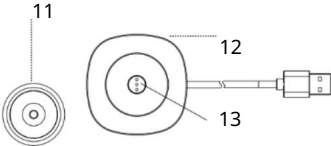

DT1056:

Poate fi încărcat cu un cablu USB-C standard conectat la un adaptor sau la un computer.

DT1056 și DT1056A:


Înainte de a încărca periuța de dinți, asigurați-vă că ați îndepărtat orice murdărie din zona de contact dintre periuță și bază.

3. Utilizare

Atașarea capului periei la mâner

Așezați capul periei pe mânerul periei și asigurați-vă că există un mic spațiu între cele două părți.

(Distanța este pentru a se asigura că capul periuței nu atinge mânerul periuței de dinți electrice în timpul vibrațiilor de înaltă frecvență, astfel încât motorul să aibă mai multă putere).

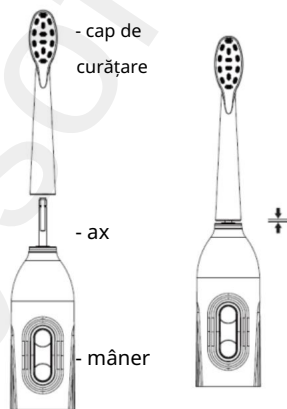

Aplicați pastă de pastă

Umeziți perii și stoarceți pasta de dinți uniform pe capul periuței.

Funcționarea periei

1) Pornirea alimentării

- i. Faceți clic pe butonul de pornire de pe produs pentru a-l porni.
- b. După pornire, ultimul mod utilizat este selectat automat.
- C. Produsul funcționează la viteză mică în primele 2 secunde pentru a preveni stropirea pastei de dinți, iar după 2 secunde trece la viteză normală.
- d. După pornirea periuței de dinți, timpul total de funcționare al acesteia este de 2 minute, cu pauze scurte la fiecare 30 de secunde, ca o reamintire pentru schimbarea zonei de curățare.

2) Mod

- i. Apăsați butonul de pornire timp de 5 secunde după pornirea curățării. Această periuță de dinți oferă 3 moduri de curățare.
- b. Consultați diagrama produsului pentru selectarea modului.
- C. Modul implicit este Reîmprospătare – Reparare soft.

3) Comutarea vitezei

i. Când este în funcțiune normală, la 2 secunde după pornire, apăsați butonul de reglare a puterii pentru a comuta puterea de curățare. Există 7 niveluri disponibile, iar prin apăsarea lungă a butonului de reglare a forței, puteți modifica continuu viteza înainte și înapoi.

b. După schimbarea vitezei, indicatorul de viteză corespunzător se aprinde.

c. Setarea implicită este a 3-a viteză.

4) Oprire

După apăsarea butonului de pornire timp de 5 secunde, va intra în starea de oprire.

5) Funcție de memorie a puterii de curățare

Când apăsați butonul de pornire pentru a-l porni, vor fi activate ultimul mod și ultima viteză utilizate.

6) Memento baterie și încărcare

i. După pornire, indicatorul de alimentare (lumină verde) se va aprinde; dacă capacitatea bateriei este mai mică de 10%, lumina de avertizare privind alimentarea va clipi; încărcați dispozitivul la timp

b. Dispozitivul nu poate fi pornit sau utilizat în timpul încărcării.

c. Timpul de încărcare este de aproximativ 5 ore. Indicatorul luminos al bateriei (roșu) va clipi în timpul încărcării, iar indicatorul luminos al bateriei se va aprinde verde când este complet încărcată. Deconectați cablul de încărcare la timp pentru a preveni supraîncălzirea.

d. Când bateria se descarcă, aceasta trebuie încărcată mai mult de 15 minute înainte de a putea fi pornit din nou.


Sfaturi:

Pentru a preveni stropirea cu pasta de dinți, umeziți mai întâi perii periutei de dinți, aplicați o cantitate adecvată de pastă de dinți, puneți periuța în gură și apoi porniți periuța de dinți.

Nu apăsați pe capul periei, deoarece acest lucru va face ca peria să nu funcționeze corect. Mișcați periuța ușor și în unghiul potrivit față de interfața gingie-dinți.

4. Periajul corect al dinților

- Așezați capul periutei la joncțiunea dinților cu gingiile la un unghi de 45 de grade, apăsați butonul pentru a porni periuța de dinți electrică.

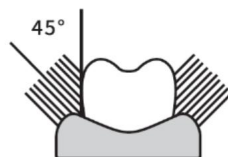

- Mișcați ușor capul periuței înainte și înapoi printre dinți, în trepte mici, mișcându-l continuu pe tot parcursul ciclului de periaj.

Periuța de dinți electrică se oprește la fiecare 30 de secunde pentru a vă reaminti să curățați următoarea zonă/cadran al gurii. Când periuța de dinți electrică se oprește automat, înseamnă că s-a atins timpul de periaj recomandat.

- Pentru a preveni stropirea cu spumă de pastă de dinți, opriți periuța de dinți electrică înainte de a o scoate din gură.

Observa:

Chiar dacă aveți dinți și gingii sănătoase, gingiile pot sângera ușor când începeți să folosiți periuța de dinți. Această sângerare ar trebui să dispară în două săptămâni. După acest timp, gingiile se vor obișnui cu utilizarea unei periuțe de dinți. Dacă problema sângerării persistă, întrerupeți utilizarea periuței de dinți și consultați medicul dentist.

5. Îngrijirea capului de periuță

După periajul dinților, curățați capul periuței cu apă caldă curată și ștergeți mânerul cu o lavetă moale. Apoi depozitați într-un loc uscat.

Avertizare

Înainte de fiecare utilizare, verificați dispozitivul pentru a depista eventuale deteriorări evidente. Dacă apar deteriorări sau dacă dispozitivul este grav avariat în urma unei căderi, nu îl utilizați.

Persoanele care au suferit recent intervenții chirurgicale orale sau gingivale sau care urmează un tratament sunt sfătuite să consulte un medic stomatolog înainte de a utiliza acest produs. Dacă aveți alte simptome orale, cum ar fi dinți slăbiți sau sângerări constante ale gingiilor, consultați un medic stomatolog înainte de a utiliza acest produs. Persoanele cu dinți sensibili și fragili ar trebui să consulte medicul dentist înainte de a utiliza acest produs.

În timpul utilizării inițiale a acestui produs, unii utilizatori pot prezenta mâncărimi, furnicături sau sângerări ale gingiilor, nu vă faceți griji, acestea vor dispărea de obicei după două săptămâni; dacă durează mai mult, consultați un medic.

Acest produs este un produs de curățenie personală. Vă rugăm să nu îl utilizați pe mai multe persoane. Nu expuneți produsul la lumina soarelui. Încercați să nu îl plasați într-un mediu umed pentru o perioadă lungă de timp. Trebuie depozitat într-un mediu ventilat, la o temperatură cuprinsă între 7 și 40 de grade.

Rezistent la apă la nivelul IPX-7, nu include izolație eficientă împotriva apei fierbinți și a aburului, vă rugăm să nu îl utilizați în cadă sau la duș.

Dacă simțiți orice disconfort sau durere după utilizare, opriți imediat utilizarea dispozitivului și solicitați asistență medicală. Dacă aveți orice afecțiuni medicale, consultați medicul înainte de a utiliza această periuță de dinți electrică. Acest produs nu este potrivit pentru copii sub 3 ani sau pentru persoanele cu dizabilități mintale și incapacitate de utilizare.

Verificați și curățați periodic portul de încărcare pentru a preveni acumularea de praf și murdărie, ceea ce reduce efectul izolator și duce la consecințe nedorite, cum ar fi supraîncălzirea.

Aruncați mânerul și accesoriile uzate conform reglementărilor locale privind reciclarea și eliminarea aparatelor electrocasnice mici.

Acest produs este destinat exclusiv curățării orale. Nu îl utilizați în niciun alt scop. Dacă simțiți orice disconfort sau durere, întrerupeți utilizarea acestui produs și consultați un medic dentist.

Nu modificați sau reparați acest produs.

Pentru a asigura siguranța, persoanele cu abilități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe trebuie să utilizeze acest produs sub supravegherea sau instrucțiunile unei alte persoane. Nu permiteți copiilor să se spele pe dinți sau să efectueze lucrări de întreținere a produsului fără supraveghere. A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub 8 ani. Țineți copiii sub supraveghere și împiedicați-i să se joace cu produsul.

Așezați acest produs într-un mediu ventilat și uscat, evitați lumina directă a soarelui, focul și alte obiecte care emit căldură.

Dacă aveți întrebări despre stimulatoarele cardiace sau alte dispozitive implantate, consultați medicul dentist sau producătorul dispozitivului implantat înainte de a utiliza produsul.

Protecția mediului:

Bateria reîncărcabilă cu litiu din interiorul acestui produs poate conține substanțe care poluează mediul. Înainte de a arunca acest produs sau de a-l duce la un punct de reciclare desemnat de autorități, asigurați-vă că scoateți mai întâi bateria și o trimiteți la un punct de reciclare desemnat. Dacă nu puteți scoate bateria, puteți returna produsul la centrul de service post-vânzare.

Distribuitor

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz